

Posey Kondomhalter Art. Nr. 6550

Bei der Verwendung von Kondomen zur Urinableitung bei männlichen inkontinenten Patienten bietet der Posey-Kondomhalter einen sicheren Weg zur Fixierung des Kondoms. Er besteht aus 6 mm starkem Polyurethan - Schaumstoff und wird von oben um das Kondom gelegt. Mehrmalige Hand - oder Maschinenwäsche des Kondomhalters sind möglich.

Posey Accessoire Pour Incontinents

FIXATEUR POSEY POUR CATHETER EXTERNE ART. 6550

Cette fixation est le moyen le plus sûr et le plus confortable pour maintenir sur le pénis un cathéter externe roulé (type préservatif). Le ruban en mousse de polyuréthane de 5mm s'enroule autour du cathéter externe en place. Le fixateur Posey résiste à plusieurs lavages, même en machine. Le fixateur Posey s'adapte à tous les modèles de cathéters roulés.

Posey Condoomcatheterbevestiging

De Posey condoomcatheterbevestiging is een zekere, veilige manier om condoomcatheters bij manlijke Patienten op zijn plaats te houden. De uit 1/4" polyurethane foam vervaardigde condoomcatheterbevestiging wordt rondom de condoomcatheter gewikkeld. De condoomcatheterbevestiging kan met de hand of in een wasmachine verschillende keren gewassen worden, alvorens weggegooid te worden. Art. Nr. 6550.

Posey Uridomhållare Art. Nr. 6550

POSEY URIDOMHÅLLARE är ett tillförlitligt hjälpmedel att hålla uridomen på plats hos inkontinenta manliga patienter. Uridomhållaren är tillverkad av mjuk skumplast och försedd med Velcro-låsande resårband. Kan maskin - eller handvättas åtskilliga gånger och återanvändas.



Posey®

Incontinence Sheath Holders

The safe, sure way to hold an external catheter holder in place on a male patient.


- Measures 5" L x 1¼" W (12.7 cm x 3.175 cm).
- Polyurethane foam.
- One size fits all.

REF 6550

Application:

1. Unroll the sheath on the penis, leaving approximately 2" (5 cm) between the end of the penis and the bottom of the sheath. The Posey Sheath Holder fits over the sheath at the base of the penis.
2. Wrap the short end of the holder around the penis, as high up as possible, with the blue (foam) side facing in.
3. Wrap the longer end around the opposite direction, overlapping the short end (longer end may be trimmed to fit).
4. Stretch the elastic slightly and wrap around the same way as the short end.
5. Secure by pressing the "hook" fastening tape against the fuzzy nylon backing of the foam.

⚠ WARNING *DO NOT pull elastic too tight. Foam should not be compressed when applied. Check frequently for irritation, swelling and skin integrity. It may be necessary to shave the base of the penis to ensure a firm attachment of the sheath holder.*

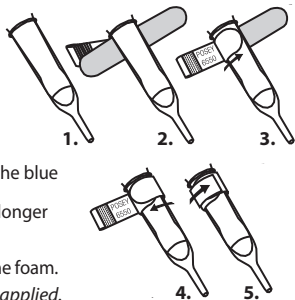

Posey Company • 5635 Peck Road, Arcadia, CA 91006-0020 USA • www.posey.com
Phone: 1.800.447.6739 or 1.626.443.3143 • Fax: 1.800.767.3933 or 1.626.443.5014



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany



C3605 REV E 121316