



Posey® Twice-As-Tough® Cuffs 2790, 2790Q Application Instructions for Wrist and Ankle



Rx ONLY

DESCRIPTION OF PRODUCT: Padded limb restraints with double-security closure. For bed and stretcher use only.

INTENDED USE:

- To protect patients assessed to be at risk of disrupting life-saving treatments (e.g., chronic tube pulling) or in danger of injury to themselves or to others by limiting limb movement in a bed or stretcher.
- Follow your hospital's restraint policies and procedures that are compliant with USA CMS guidelines and state laws, or other governing agencies outside the USA.

CONTRAINDICATIONS: None

APPLICATION INSTRUCTIONS: The order of either application or removal of the straps to the bed OR the cuff to the patient is to be determined by the clinician. Use method a. or b. below to attach straps to frame. Follow these steps to apply device (repeat steps 1-3 on each side):

1a. Triangulation process; to restrict patient's range of motion: separate the straps and attach at different points along the frame that moves with the patient (Fig. 1) out of patient's reach (do not attach to side rail or head/footboard) (Fig. 2).

1b. To increase patient's range of motion: place the straps together and attach to a single point along a part of the frame that moves with the patient, out of the patient's reach.

2. Bring the ends of the strap down through the inside of the side rails so they do not interfere when the side rails are raised. Make sure that the straps are attached to the frame that moves with the patient (Fig. 1) (do not attach to side rail or head/footboard), out of the patient's reach.

3. **2790:** Thread the end of the strap over the top, around the frame, at least once, and through the two D-rings. Bring the strap back over the first ring and through the second D-ring (Fig. 3), or attach with a quick-release tie. To limit unwanted adjustment, tie an overhand knot with the excess strap directly below the D-ring.

2790Q: Thread the end of the strap over the top, around the frame, at least once, and close the quick-release buckle. Listen for a "snapping" sound. Pull firmly on straps to ensure a good connection (Fig. 4). If buckle does not fit an opening, use the alternate method in Fig. 5 by looping the webbing through the frame opening, inserting the buckle through the loop, and securing the male buckle to the female buckle to secure. Close the quick-release buckle by sliding the male end into the female end (Fig. 4). To limit unwanted adjustment, tie an overhand knot with the excess strap directly below the quick-release buckle.









APPLYING THE CUFFS: (Repeat steps 1-3 for each side):

1. Wrap the neoprene piece around wrist/ankle so the buckle and connecting strap is on the ulnar side of the wrist or lateral malleolus of the ankle. Attach the black hook-and-loop pieces together and pull back the black pull tab on the blue fuzzy piece, followed by the blue hook-and-loop pieces. The fuzzy piece should be sandwiched between the two pieces of hook (Fig. 6). Be sure to overlap at least one inch (3 cm).

2. Press the hook-and-loop closure together firmly and make sure it adheres securely. Slide ONE finger (flat) between the cuff and the inside of the patient's wrist/ankle to ensure proper fit (Fig. 7).

3. **2790:** Pass the end of the limb strap over the top of the cuff and through the two D-rings on the cuff. Bring the strap back over the first ring and through the second D-rings on the cuff. Slide ONE finger (flat) between the cuff and the strap.

2790Q: Close the quick-release buckle on the cuff. Insert ONE finger (flat) under the buckle and pull the strap snug, but not so tight as to restrict circulation (Fig. 8). Release the quick-release buckle, twist buckle 180°, and reconnect (Fig. 9). Listen for a "snapping" sound.

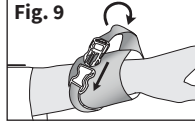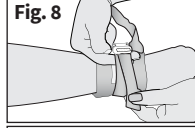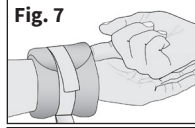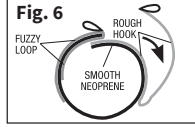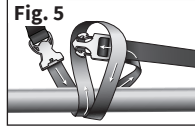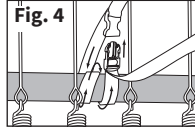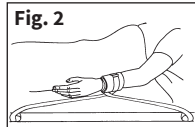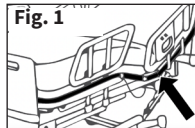

2790



2790Q

POSEY TWICE-AS-TOUGH LIMB HOLDER:

REF 2790 D-Ring Cuff (double strap with D-Rings), Regular/Blue

REF 2790Q Quick-Release Buckle Cuff (double strap with quick-release buckle), Regular/Blue

ADJUSTING STRAP LENGTH: Adjust the connecting strap(s) length from the frame to allow desired freedom of movement without compromising patient or caregiver safety. To limit unwanted adjustment, tie an overhand knot with the excess strap directly below the quick-release buckle and D-ring. Ensure the remaining strap end(s) are secured and out of the reach of the patient.

TO REMOVE: Release the cuff from the patient. Release the anchor strap from the bed frame.

TO LIMIT LOWER LIMB RANGE OF MOTION FOR LEGS (FIG. 10): The clinician applying the strap's criss-cross application method can determine which is applied first (cuff or strap) and which end of the restraint is criss-crossed.

1. Attach the cuff that is secured to the bottom right side of the frame, that moves with the patient, out of the patient's reach to the left ankle.
2. Criss-cross the straps and attach the cuff secured to the bottom left side of the frame, that moves with the patient, out of the patient's reach to the right ankle.
3. Adjust connecting straps as necessary.



PRECAUTIONS:

- A clinical assessment and decision are required when used with monitoring lines or if patient has a wound or dislocated/fractured limb.
- Check the patient regularly to ensure that circulation is not impaired. Serious injury may occur if the cuffs restricts circulation when the limb holder is applied.

WARNING: Additional or different body or limb restraints may be needed (visit tidiproductions.com):

- Some patients may require additional interventions in conjunction with a restraint in order to prevent injury to self or others.
 - If the patient pulls violently against the bed straps.
 - To reduce the risk of the patient getting access to the line/wound/tube site.
 - To prevent the patient from flailing or bucking up and down and causing self-injury.
- It is a clinical decision to decide when a restraint is no longer deemed safe.

BED SAFETY: Refer to the Food and Drug Administration (FDA), or other governing agencies outside the USA, for the most recent Hospital Bed Safety Guidelines and the bed manufacturer's instructions for use.

EN Report any serious incident related to device use to TIDI Products and the Member State Competent Authority. | Translations of this document in French, Spanish, Dutch, German, Italian, and Portuguese are located at www.tidiproductions.com/IFU.

ADDITIONAL SAFETY AND LAUNDERING INSTRUCTIONS ON OTHER SIDE.



Posey® Twice-As-Tough® Manschetten 2790, 2790Q

Anwendungshinweise für Hand- und Fußgelenk



NUR für den behandelnden Arzt

PRODUKTBESCHREIBUNG: Gepolsterte Rückhaltevorrichtungen mit doppeltem Sicherheitsverschluss. Nur für den Gebrauch an Bett und Krankentrage.

VERWENDUNGSZWECK:

- Zum Schutz von Patienten, bei denen die Gefahr einer Unterbrechung lebensrettender Behandlungen (z. B. dauerhaftes Herausziehen des Tubus) oder einer Selbst- oder Fremdgefährdung besteht, indem die Bewegung der Gliedmaßen in einem Bett oder auf einer Trage eingeschränkt wird.
- Befolgen Sie die in Ihrem Krankenhaus geltenden Richtlinien und Verfahren für Rückhaltevorrichtungen, die die CMS-Richtlinien und bundesstaatlichen Gesetze in den USA oder der zuständigen Autoritäten außerhalb der USA einhalten.

KONTRAINDIKATIONEN: Keine

ANWENDUNGSHINWEISE: Die Reihenfolge des Anbringens oder Entfernens der Gurte am Bett ODER der Manschetten am Patienten wird durch den Arzt bestimmt. Verwenden Sie die folgende Methode a oder b, um die Gurte am Bettrahmen zu befestigen. Führen Sie diese Schritte durch, um das Produkt anzubringen (Schritte 1 bis 3 auf jeder Seite wiederholen):

1a. Triangulationsverfahren; zur Begrenzung des Bewegungsbereichs des Patienten: Trennen Sie die Gurte und befestigen Sie sie außerhalb der Reichweite des Patienten an verschiedenen Stellen an dem Bettrahmen, der mit dem Patienten bewegt wird (Abb. 1) (nicht am Seitengitter oder Kopf-/Fußende befestigen) (Abb. 2).

1b. Zur Erweiterung des Bewegungsbereichs des Patienten: Legen Sie die Gurte zusammen und befestigen Sie sie außerhalb der Reichweite des Patienten an einer einzigen Stelle an einem Teil des Bettrahmens, der mit dem Patienten bewegt wird.

2. Führen Sie die Gurtenden durch die Innenseite der Seitengitter nach unten, sodass das Hochziehen der Seitengitter nicht behindert wird. Achten Sie darauf dass die Gurte außerhalb der Reichweite des Patienten am Bettrahmen befestigt sind, der mit dem Patienten bewegt wird (Abb. 1) (nicht am Seitengitter oder Kopf-/Fußende befestigen).

3. **2790:** Legen Sie das Gurtende an der Oberseite mindestens einmal um den Bettrahmen herum und führen es durch die beiden D-Ringe. Führen Sie den Gurt zurück über den ersten Ring und durch den zweiten D-Ring (Abb. 3) oder befestigen Sie ihn mit einem Schnellverschluss. Binden Sie einen Überhandknoten mit der überschüssigen Gurtlänge direkt unter dem D-Ring, um ein unerwünschtes Verstellen zu vermeiden.

2790Q: Legen Sie das Gurtende an der Oberseite mindestens einmal um den Bettrahmen herum und schließen Sie die Schnellverschlusschnalle. Es muss ein Einschnappergeräusch zu hören sein. Ziehen Sie fest an den Gurten, um eine gute Verbindung zu gewährleisten (Abb. 4). Wenn die Schnalle nicht durch eine Öffnung passt, wenden Sie die in Abbildung 5 gezeigte alternative Methode an. Bilden Sie mit dem Gurtband eine Schlaufe, führen Sie sie durch die Öffnung des Bettrahmens, führen Sie die Schnalle durch diese Schlaufe und stecken Sie den Stecker der Schnalle in die Schnallenbuchse. Schließen Sie die Schnalle des Schnellverschlusses, indem Sie den Stecker des Verschlusses in die Buchse schieben (Abb. 4). Binden Sie einen Überhandknoten mit der überschüssigen Gurtlänge direkt unter der Schnellverschlusschnalle, um ein unerwünschtes Verstellen zu vermeiden.









ANLEGEN DER MANSCHETTEN: (Schritte 1 bis 3 für jede Seite wiederhole):

1. Wickeln Sie das Neoprenteil um das Hand-/Fußgelenk des Patienten, sodass sich Schnalle und Verbindungsgurt auf der Ellenseite des Handgelenks oder am Außenknöchel des Fußgelenks befinden. Befestigen Sie die schwarzen Klettverschlüsse und ziehen Sie erst die schwarze Aufreiblasche auf dem blauen weichen Stück zurück, dann die blauen Klettverschlüsse. Legen Sie das weiche Stück zwischen den beiden Hakenstücken ein (Abb. 6). Sie müssen mindestens 3 cm überlappen.

2. Drücken Sie den Klettverschluss fest zusammen und vergewissern Sie sich, dass er sicher haftet. Schieben Sie EINEN Finger (flach) zwischen die Manschette und die Innenseite des Hand-/Fußgelenks des Patienten, um einen korrekten Halt zu gewährleisten. (Abb. 7)

3. **2790:** Führen Sie das Ende des Rückhaltegurts über die Oberseite der Manschette und durch die beiden D-Ringe an der Manschette. Führen Sie den Gurt zurück über den ersten Ring und durch den zweiten D-Ring an der Manschette. Schieben Sie EINEN Finger (flach) zwischen die Manschette und den Gurt.

2790Q: Schließen Sie die Schnalle des Schnellverschlusses an der Manschette. Stecken Sie EINEN Finger (flach) unter die Schnalle und ziehen Sie den Gurt straff, aber nicht zu fest, um die Durchblutung nicht zu beeinträchtigen (Abb. 8). Lösen Sie die Schnalle des Schnellverschlusses, drehen Sie die Schnalle um 180° und schließen Sie sie wieder (Abb. 9). Es muss ein Einschnappergeräusch zu hören sein.

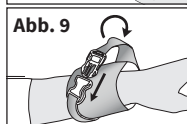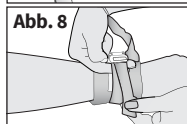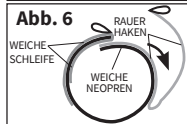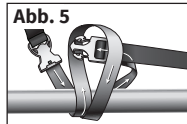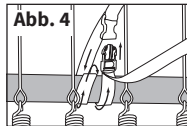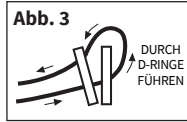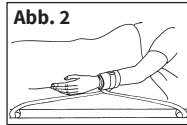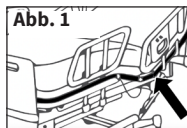

2790



2790Q

POSEY TWICE-AS-TOUGH MANSCHETTEN ZUR PATIENTENFIXIERUNG :

REF 2790 D-Ring-Manschette (doppelter Gurt mit D-Ringen), regulär/blau

REF 2790Q Manschette mit Schnellverschlusschnalle (doppelter Gurt mit Schnellverschlusschnalle), regulär/blau

ANPASSEN DER GURTLÄNGE: Stellen Sie die Länge der Verbindungsgurte vom Bettrahmen aus ein, um die gewünschte Bewegungsfreiheit zu gewährleisten, ohne die Sicherheit des Patienten oder des Pflegepersonals zu beeinträchtigen. Binden Sie einen Überhandknoten mit der überschüssigen Gurtlänge direkt unter der Schnellverschlusschnalle und dem D-Ring, um ein unerwünschtes Verstellen zu vermeiden. Die verbleibenden Gurtenden müssen gesichert sein und sich außerhalb der Reichweite des Patienten befinden.

ENTFERNEN: Lösen Sie die Manschette vom Patienten. Lösen Sie den Befestigungsgurt vom Bettgestell.

BESCHRÄNKUNG DES BEWEGUNGSBEREICHS DER BEINE (ABB. 10): Der Arzt, der die Methode mit kreuzweise angelegtem Gurt anwendet, kann bestimmen, was zuerst angebracht wird (Manschette oder Gurt) und welches Ende der Rückhaltevorrichtung kreuzweise angebracht wird.

1. Befestigen Sie die Manschette, die an der rechten unteren Seite des Bettrahmens (der mit dem Patienten bewegt wird) gesichert ist, außerhalb der Reichweite des Patienten am linken Fußgelenk.
2. Kreuzen Sie die Gurte und befestigen Sie die Manschette, die an der linken unteren Seite des Bettrahmens (der mit dem Patienten bewegt wird) gesichert ist, außerhalb der Reichweite des Patienten am rechten Fußgelenk.
3. Passen Sie die Verbindungsgurte nach Bedarf an.



Abb. 10

VERSICHTSMASSNAHMEN:

- Bei Einsatz von Überwachungslinien oder wenn der Patient eine Wunde oder verrenkte/gebrochene Extremitäten hat, sind im Vorfeld eine klinische Begutachtung und Entscheidung erforderlich.
- Überprüfen Sie den Patienten regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Durchblutung nicht beeinträchtigt ist. Schwere Verletzungen können auftreten, wenn die Manschetten bei angelegter Extremitätenhalterung die Durchblutung einschränken.

⚠️ WARNUNG: Es können zusätzliche oder andere Rückhaltevorrichtungen für Körper oder Extremitäten erforderlich sein (siehe tidiproducts.com):

- Bei manchen Patienten sind u. U. zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der Fixierung erforderlich, um Selbst- oder Fremdgefährdung zu vermeiden.
 - Wenn der Patient gewaltsam an den Gurten zieht.
 - Um das Risiko zu verringern, dass der Patient Zugang zu den Leitungen/Wunden/ Schläuchen erhält.
 - Um zu verhindern, dass der Patient sich auf- und abbewegt und sich selbst verletzt.
- Es ist eine klinische Entscheidung, ob und wann die Fixierung nicht mehr als sicher gilt.

BETTSICHERHEIT: Für die aktuellsten Sicherheitsrichtlinien für Krankenhausbetten wird auf die Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) oder andere Aufsichtsbehörden außerhalb der USA sowie auf die Gebrauchsanweisung des Bettenherstellers verwiesen.

DE

Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit der Verwendung der Vorrichtung an TIDI Products sowie an die zuständige Behörde des Mitgliedstaates. Übersetzungen dieses Dokuments in die Sprachen Französisch, Spanisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch und Portugiesisch finden Sie auf www.tidiproducts.com/IFU.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE ZUR SICHERHEIT SOWIE ANLEITUNGEN ZUM WASCHEN BEFINDEN SICH AUF DER RÜCKSEITE.

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Telefon: +1.800.521.1314 • International: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com

© 2023 TIDI Products, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Posey ist eine eingetragene Marke von TIDI Products, LLC.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Deutschland



UK Verantwortliche Person
Emargo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
Vereinigtes Königreich



19253 REV D 2023-12-15



Brazaletes Posey® Twice-As-Tough® 2790, 2790Q

Instrucciones de aplicación para muñeca y tobillo



Solo con receta médica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Correas de seguridad acolchadas para extremidades con doble cierre de seguridad. Solo para uso en camas y camillas.

USO PREVISTO:

- Para la protección de pacientes cuya evaluación indica un riesgo de interrupción de tratamientos de soporte vital (p. ej., tirando persistentemente de tubos) o un peligro de lesionarse a sí mismos o a otros, limitando el movimiento de las extremidades en camas o camillas.
- Siga las políticas y procedimientos de sujeción de su hospital que cumplan con las pautas y las leyes estatales de los CMS de EE. UU. u otras agencias gubernamentales de fuera de EE. UU.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: El médico debe determinar el orden de aplicación o extracción de las correas a la cama o el manguito al paciente. Utilice el método (a.) o (b.) a continuación para fijar las correas al marco. Siga estos pasos para colocar el dispositivo (repita los pasos 1-3 en cada lado):

1a. Proceso de triangulación; para restringir el rango de movimiento del paciente: separe las correas y fíjelas en distintos puntos a lo largo del marco que se mueve con el paciente (Fig. 1) fuera del alcance de este (no las sujete a la barandilla lateral ni al cabecero o a los pies de la cama) (Fig. 2).

1b. TPara aumentar el rango de movimiento del paciente: coloque las correas juntas y fíjelas en un solo punto a lo largo de una parte del marco que se mueve con el paciente fuera del alcance de este.

2. Pase los extremos de la correa por debajo a través del interior de las barandillas laterales para que no interfieran cuando estas se levanten. Asegúrese de que las correas estén unidas al marco que se mueve con el paciente (Fig. 1) (no las sujete a las barandillas laterales ni al cabecero o a los pies de la cama), fuera del alcance del paciente.

3. **2790:** Pase el extremo de la correa por la parte superior alrededor del marco al menos una vez y a través de las dos anillas en D. Vuelva a colocar la correa sobre la primera anilla y a través de la segunda anilla en D (Fig. 3), o fíjela con una brida de liberación rápida. Para reducir los ajustes no deseados, haga un nudo simple con el exceso de correa directamente debajo de la anilla en D.

2790Q: Pase el extremo de la correa por la parte superior alrededor del marco al menos una vez y cierre la hebilla de liberación rápida. Deberá escuchar un sonido de chasquido. Tire firmemente de las correas para asegurar una buena conexión (Fig. 4). Si la hebilla no cabe en una abertura, use el método alternativo de la Fig. 5; pase la cinta a través de la abertura del bastidor, inserte la hebilla a través del bucle y asegure la hebilla macho a la hebilla hembra para afianzarlo. Cierre la hebilla de liberación rápida deslizando el extremo macho hacia el extremo hembra (Fig. 4). Para reducir los ajustes no deseados, haga un nudo simple con el exceso de correa directamente debajo de la hebilla de liberación rápida.









EMPLEO DE LOS BRAZALETES: (Repita los pasos 1-3 para cada lado):

1. Envuelva la pieza de neopreno alrededor de la muñeca/tobillo de modo que la hebilla y la correa de conexión estén en el lado cubital de la muñeca o en el maléolo lateral del tobillo. Una las piezas negras de velcro y tire de la lengüeta negra de la pieza mullida azul, seguida de las piezas azules de velcro. La pieza mullida deberá colocarse entre las dos piezas de gancho (Fig. 6). Asegúrese de superponer al menos 3 cm.

2. Presione el cierre de velcro con firmeza y asegúrese de que esté adherido de forma segura. Deslice UN dedo (plano) entre el brazaletes y el interior de la muñeca/tobillo del paciente para asegurar un ajuste adecuado. (Fig. 7)

3. **2790:** Pase el extremo de la correa de la extremidad sobre la parte superior del brazaletes y a través de las dos anillas en D de este. Vuelva a colocar la correa sobre la primera anilla y a través de la segunda anilla en D del brazaletes. Deslice UN dedo (plano) entre el brazaletes y la correa.

2790Q: Cierre la hebilla de liberación rápida del brazaletes. Inserte UN dedo (plano) debajo de la hebilla y tire de la correa para que quede ceñida, pero no tan apretada como para restringir la circulación (Fig. 8). Suelte la hebilla de liberación rápida, gírela 180° y vuelva a conectarla (Fig. 9). Deberá escuchar un sonido de chasquido.

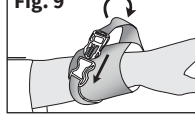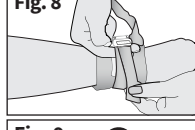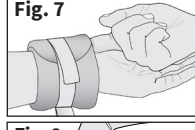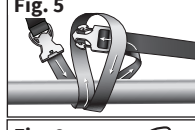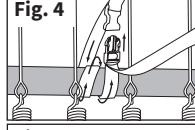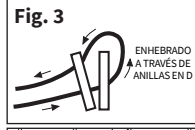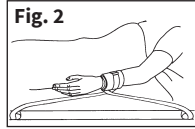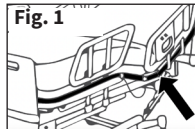

2790



2790Q

SOPORTE PARA LAS EXTREMIDADES CON BRAZALETE POSEY TWICE-AS-TOUGH:

REF 2790 Manguito con anilla en D (correa doble con anillas en D), normal/azul

REF 2790Q Brazaletes con hebilla de liberación rápida (correa doble con hebilla de liberación rápida), normal/azul

AJUSTE DE LA LONGITUD DE LAS CORREAS: Ajuste la longitud de las correas de conexión desde el marco para permitir la libertad de movimiento deseada sin comprometer la seguridad del paciente o del cuidador. Para reducir los ajustes no deseados, haga un nudo simple con el exceso de correa directamente debajo de la hebilla de liberación rápida y anilla en D. Asegúrese de que los extremos restantes de la correa estén asegurados y fuera del alcance del paciente.

PARA RETIRARLO: Suelte el brazaletes del paciente. Suelte la correa de anclaje de la estructura de la cama.

PARA LIMITAR EL ALCANCE DE MOVIMIENTO DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES (FIG. 10): El facultativo que coloca el método de aplicación entrecruzada de la correa puede determinar cuál se aplica primero (brazaletes o correa) y qué extremo del sistema de sujeción está entrecruzado.

1. Fije la tobillera que está asegurada al lado inferior derecho del marco que se mueve con el paciente, fuera del alcance del paciente, al tobillo izquierdo.
2. Cruce las correas y asegure la tobillera al lado inferior izquierdo del marco que se mueve con el paciente, fuera del alcance del paciente, al tobillo derecho.
3. Ajuste las correas de conexión según sea necesario.



PRECAUCIONES:

- Se requiere una decisión y evaluación clínica cuando se use con vías de monitorización o si el paciente tiene una herida o una extremidad dislocada/fracturada.
- Revise al paciente con regularidad para asegurarse de que la circulación no se vea afectada. Pueden producirse lesiones graves si los brazaletes restringen la circulación cuando se coloca el soporte para extremidades.

ADVERTENCIA: Es posible que se necesiten correas de seguridad distintas o adicionales para el cuerpo o las extremidades (visite tidiproducts.com):

- Algunos pacientes pueden requerir intervenciones adicionales junto con una restricción para evitar lesiones a sí mismos o a otras personas.
 - Si el paciente tira violentamente de las correas de la cama.
 - Para reducir el riesgo de que el paciente tenga acceso al sitio de la vía/herida/sonda.
 - Para evitar que el paciente se sacuda o se mueva hacia arriba y hacia abajo y se.
- Es una decisión clínica decidir cuándo una restricción ya no se considera segura.

SEGURIDAD EN LA CAMA: Póngase en contacto con la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. (FDA) u otras agencias gubernamentales fuera de los EE. UU. para obtener información sobre las directrices de seguridad para camas de hospital más recientes y las instrucciones de uso del fabricante de la cama.

ES Informe de cualquier incidente grave relacionado con el uso del dispositivo a TIDI Products y a la autoridad competente del Estado miembro. | Las traducciones de este documento en francés, español, holandés, alemán, italiano y portugués se encuentran en www.tidiproducts.com/IFU.

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD Y LAVADO EN LA OTRA CARA.



Attache-poignets/chevilles Posey® Twice-As-Tough® 2790, 2790Q



Posey®

Instructions d'application pour les poignets et les chevilles

DESCRIPTION DU PRODUIT: manchons de contention pour les extrémités, rembourrés et munis de fermeture à double sécurité. Réservé exclusivement à l'emploi sur lits ou brancards.

UTILISATION PRÉVUE:

- Protéger les patients considérés comme à risque de perturber les traitements vitaux (p. ex. qui retirent continuellement leur sonde) ou présentant un danger pour eux-mêmes ou autrui en limitant le mouvement des membres dans un lit ou un brancard.
- Suivre les politiques et les procédures de contention de l'hôpital qui sont en conformité avec les directives des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) et les lois propres à chaque état pour les États-Unis ou, en dehors des États-Unis, des autorités compétentes.

CONTRE-INDICATIONS: Aucune

INSTRUCTIONS D'UTILISATION: L'ordre d'application ou de retrait des sangles au niveau du lit OU de l'attache-membre au niveau du patient doit être déterminé par le clinicien. Veuillez utiliser la méthode a. ou b. ci-dessous pour fixer les sangles au cadre. Veuillez suivre ces étapes pour poser le dispositif (répétez les étapes 1 à 3 de chaque côté) :

1a. Procédure de triangulation ; pour limiter le champ de mobilité du patient : séparez les courroies et fixez-les à différents points du cadre qui se déplace avec le patient (Fig. 1) et hors de portée de celui-ci (ne pas les fixer aux barrières latérales ni à la tête ou au pied du lit) (Fig. 2).

1b. Pour élargir le champ de mobilité du patient : placez les courroies ensemble et fixez-les à un point unique sur une partie du cadre qui se déplace avec le patient, hors de portée de celui-ci.

2. Placez les extrémités de la sangle vers le bas, à l'intérieur des barrières latérales, afin que les extrémités n'entravent pas le relevage des barrières latérales le cas échéant. Assurez-vous que les sangles sont fixées au cadre qui se déplace avec le patient (Fig. 1) (ne les attachez pas à la barrière latérale, ni à la tête ou au pied du lit), hors de portée du patient.

3. **2790:** Faites passer l'extrémité de la sangle par-dessus le cadre en l'enroulant au moins une fois, et à travers les anneaux en D. Ramenez la sangle vers l'arrière sur le premier anneau et à travers le second anneau en D (Fig. 3), ou fixez-la avec une attache à dégagement rapide. Pour limiter tout ajustement indésirable, faites un nœud avec l'excès de sangle directement sous l'anneau en D.

2790Q: Faites passer l'extrémité de la sangle par-dessus le cadre en l'enroulant au moins une fois, et fermez la boucle à ouverture rapide. Vous devez entendre un claquement. Tirez fermement sur les sangles pour assurer une bonne connexion (Fig. 4). Si la boucle ne se trouve pas au niveau d'une ouverture, utilisez l'autre méthode présentée à la Fig. 5 en faisant une anse avec la sangle à travers l'ouverture du cadre, en insérant la boucle à travers l'anse, et en sécurisant la boucle mâle dans la boucle femelle pour assurer la fermeture. Fermez la boucle à ouverture rapide en glissant l'extrémité mâle dans l'extrémité femelle (Fig. 4). Pour limiter tout ajustement indésirable, faites un nœud avec l'excès de sangle directement sous la boucle à ouverture rapide.









APPLICATION DES ATTACHE-POIGNETS/CHEVILLES: (Répétez les étapes 1 à 3 des deux côtés):

1. Enroulez la pièce de néoprène autour du poignet ou de la cheville, de façon que la boucle et la sangle de connexion se trouvent du côté cubital du poignet ou de la malléole externe de la cheville. Fixez les fermetures auto-agrippantes noires et tirez vers l'arrière la languette noire sur la pièce velours bleue, puis les pièces auto-agrippantes bleues. La pièce velours doit être prise en sandwich entre les deux pièces à crochets (Fig. 6). Assurez un chevauchement d'au moins 3 cm (un pouce).

2. Appuyez fermement sur la fermeture auto-agrippante pour vous assurer qu'elle adhère bien. Faites glisser UN doigt (à plat) entre les attache-poignets/chevilles et l'intérieur du poignet ou de la cheville du patient pour assurer un ajustement correct. (Fig. 7)

3. **2790:** Passez l'extrémité de la sangle du membre par-dessus l'attache-poignets/chevilles et à travers les deux anneaux en D de l'attache-poignets/chevilles. Ramenez la sangle vers l'arrière sur le premier anneau et à travers le second anneau en D de l'attache-poignets/chevilles. Glissez UN doigt (à plat) entre l'attache-poignets/chevilles et la sangle.

2790Q: Verrouillez la boucle à ouverture rapide sur l'attachepoignets/chevilles. Insérer UN doigt (à plat) sous la boucle et tirer la courroie pour l'ajuster, sans trop la serrer au risque d'entraver la circulation (Fig. 8). Déverrouillez la boucle à ouverture rapide, tournez-la à 180° et reconnectez-la (Fig. 9). Vous devez entendre un claquement.

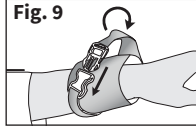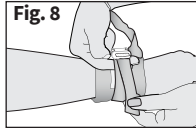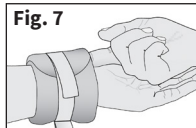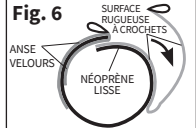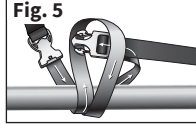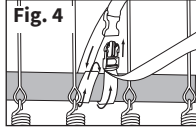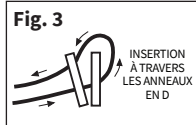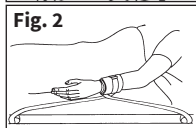

SUR PRESCRIPTION UNIQUEMENT



2790



2790Q

ATTACHE-MEMBRE AVEC BRACELETS POSEY TWICE-AS-TOUGH:

REF 2790 Attache-poignet avec anneaux en D (double sangle avec anneaux en D), taille standard/bleu

REF 2790Q Attache-poignet avec boucle à ouverture rapide (double sangle avec boucle à ouverture rapide), taille standard/bleu

AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DES SANGLES : Ajustez la longueur de la ou des sangles de connexion avec le cadre pour permettre la liberté de mouvement souhaitée, sans compromettre la sécurité du patient ou du soignant. Pour limiter tout ajustement indésirable, faites un nœud avec l'excès de sangle directement sous la boucle à ouverture rapide et l'anneau en D. Assurez-vous que la ou les extrémités des sangles restantes sont sécurisées et hors de portée du patient.

RETRAIT : Desserrer, puis ôter le bracelet du patient. Détacher la sangle de fixation du cadre de lit.

POUR LIMITER LE CHAMP DE MOBILITÉ DES JAMBES (FIG. 10): Le clinicien qui utilise la méthode de pose de la sangle par croisement est en mesure de déterminer l'élément à poser en premier (attache-chevilles ou sangle) ainsi que l'extrémité de la contention à croiser.

- L'attache-chevilles fixée au bas du côté droit du cadre qui se déplace avec le patient devra être connectée à la cheville gauche, hors de portée du patient.
- Croisez les sangles, l'attache-chevilles fixée au bas du côté gauche du cadre qui se déplace avec le patient devra être connectée à la cheville droite, hors de portée du patient.
- Ajustez les sangles de connexion au besoin.



PRÉCAUTIONS:

- Une évaluation et une décision cliniques sont nécessaires si le dispositif est utilisé avec des câbles de surveillance ou si le patient présente une plaie, une fracture ou une luxation du membre en question.
- Contrôlez régulièrement le patient afin de vous assurer que la circulation n'est pas entravée. Des lésions graves peuvent survenir si les attachepoignets/chevilles entravent la circulation lors de la contention des membres.

⚠ MISE EN GARDE: Une contention supplémentaire ou différente pour le corps ou les membres peut être nécessaire (veuillez visiter le site tidiproducs.com):

- Certains patients peuvent nécessiter des interventions supplémentaires parallèlement à une contention afin d'empêcher qu'ils ne se blessent ou qu'ils blessent les autres.
 - Si le patient tire violemment sur les sangles du lit.
 - Pour réduire le risque d'accès du patient aux câbles, plaies ou tubulures.
 - Pour empêcher le patient de s'agiter ou se cabrer de façon à se blesser.
- La détermination du moment où une contention n'est plus jugée nécessaire relève d'une décision clinique.

SÉCURITÉ DES LITS: Veuillez vous reporter à la Food and Drug Administration (FDA), ou aux autorités compétentes si en dehors des États-Unis, pour les directives ajournées sur la sécurité des lits d'hôpitaux, ainsi qu'aux instructions d'utilisation des fabricants de lits.

FR

Signalez tout incident grave lié à l'utilisation du dispositif à TIDI Products et à l'autorité compétente de l'État membre. | Les traductions de ce document en allemand, espagnol, français, italien, néerlandais et portugais sont disponibles sur le site www.tidiproducs.com/IFU.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ ET DE NETTOYAGE AU VERSO.

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Téléphone : +1.800.521.1314 • International : +1 920 751 4036
www.tidiproducs.com

© 2023 TIDI Products, LLC. Tous droits réservés. Posey est une marque déposée de TIDI Products, LLC.

EC REP MD CE
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovre,
Allemagne

UK CA
UK Responsible
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o CR360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Royaume-Uni

TIDI
Support Caregivers.
Protect Patients.
19253 REV D 2023-12-15



Bracciali Posey® Twice-As-Tough® 2790, 2790Q

Istruzioni per l'applicazione su polsi e caviglie



Rx ONLY

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: strumenti di contenzione degli arti con imbottitura e chiusura a due livelli di sicurezza. Da utilizzarsi esclusivamente su letto e barella.

DESTINAZIONE D'USO:

- Per proteggere pazienti considerati a rischio d'interrompere trattamenti salvavita (ad es., rimozione di un tubo a lunga permanenza) o che potrebbero causare lesioni a se stessi o agli altri, limitando i movimenti degli arti in un letto o in una barella.
- Seguire le politiche e le procedure di contenzione dell'ospedale conformi alle linee guida dei CMS statunitensi e alle normative statali o di altri enti governativi al di fuori degli Stati Uniti.

CONTROINDICAZIONI: Nessuna

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE: L'ordine di applicazione o rimozione delle cinghie del letto O del bracciale del paziente deve essere stabilito dal medico. Per fissare le cinghie al telaio utilizzare il metodo a. o b. indicato di seguito. Per applicare il dispositivo seguire i passaggi qui indicati (ripetere i passaggi 1-3 per ciascun lato):

1a. Processo di triangolazione; per limitare il raggio di movimento del paziente: separare le cinghie e fissarle in punti differenti lungo il telaio che si muove con il paziente (Fig. 1), lontano dalla portata del paziente (non fissarle alla guida laterale o alla testiera/pediera) (Fig.2).

1b. Per aumentare il raggio di movimento del paziente: unire insieme le cinghie e fissarle in un solo punto lungo la parte del telaio che si muove con il paziente, lontano dalla portata del paziente.

2. Portare le estremità della cinghia verso il basso facendole passare all'interno delle guide laterali, in modo che non interferiscano quando le guide laterali sono sollevate. Assicurarsi che le cinghie siano fissate al telaio che si muove con il paziente (Fig. 1), fuori dalla portata del paziente (non fissarle alla guida laterale o alla testiera/pediera).

3. **2790:** Inserire l'estremità della cinghia nella parte superiore, intorno al telaio, almeno una volta, e farla passare attraverso i due moschettoni. Portare di nuovo la cinghia sopra il primo moschettone e farla passare attraverso il secondo moschettone (Fig. 3), oppure fissarla con una legatura a sgancio rapido. Per limitare gli spostamenti indesiderati, fare un nodo semplice con la cinghia in eccesso direttamente sotto al moschettone.

2790Q: Inserire l'estremità della cinghia nella parte superiore, intorno al telaio, almeno una volta, e chiudere la fibbia a sgancio rapido. Si dovrà udire il suono "di aggancio". Tirare bene le cinghie per garantire un buon fissaggio (Fig. 4). Se la fibbia non si adatta a un'apertura, utilizzare il metodo alternativo illustrato nella Fig. 5 avvolgendo la cinghia attorno all'apertura del telaio, inserendo la fibbia nell'anello e agganciando l'estremità maschio all'estremità femmina della fibbia. Chiudere la fibbia a sgancio rapido facendo scorrere l'estremità maschio all'interno dell'estremità femmina (Fig. 4). Per limitare gli spostamenti indesiderati, fare un nodo semplice con la cinghia in eccesso direttamente sotto la fibbia a sgancio rapido.








APPLICAZIONE DEI BRACCIALI: (ripetere i passaggi 1-3 per ciascun lato):

1. Avvolgere la parte in neoprene attorno al polso/alla caviglia in modo che la fibbia e la cinghia di connessione si trovino sul lato ulnare del polso o sul malleolo laterale della caviglia. Unire le parti in velcro nere e tirare indietro l'aletta nera sopra la parte lanuginosa blu, quindi unire le parti in velcro blu. La parte lanuginosa deve essere inserita tra le due parti del gancio (Fig. 6). Sovrapporre per almeno 3 cm (1 pollice).

2. Unire saldamente la chiusura in velcro e assicurarsi che aderisca in modo stabile. Infilare UN dito (piatto) tra il bracciale e la parte interna del polso/ della caviglia del paziente per verificare che la misura sia corretta (Fig. 7).

3. **2790:** Far passare l'estremità della cinghia dell'arto sulla parte superiore del bracciale e attraverso i due moschettoni sul bracciale. Portare di nuovo la cinghia sopra il primo moschettone e farla passare attraverso il secondo moschettone sul bracciale. Far scivolare UN dito (piatto) tra il bracciale e la cinghia.

2790Q: chiudere la fibbia a sgancio rapido sul bracciale. Inserire UN dito (piatto) al di sotto della fibbia e stringere bene la cinghia, ma non tanto da limitare la circolazione del sangue (Fig. 8). Aprire la fibbia a sgancio rapido, ruotarla di 180° e collegarla nuovamente (Fig. 9). Si dovrà udire il suono "di aggancio".

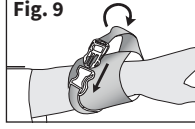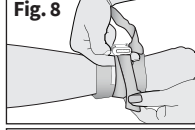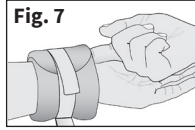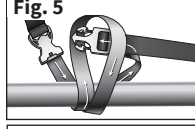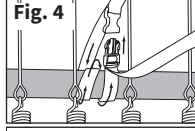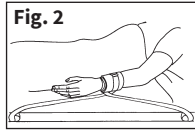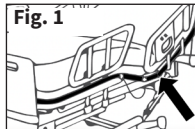

SUPPORTO PER GLI ARTI CON BRACCIALI POSEY TWICE-AS-TOUGH:

REF 2790 Bracciale con moschettone (cinghia doppia con moschettoni), standard/blu

REF 2790Q Bracciale con fibbia a sgancio rapido (cinghia doppia con fibbia a sgancio rapido), standard/blu

REGOLARE LA LUNGHEZZA DELLA CINGHIA: Regolare la lunghezza della/e cinghia/e di connessione dal telaio, in modo da consentire la libertà di movimento desiderata, senza compromettere la sicurezza del paziente o del caregiver. Per limitare gli spostamenti indesiderati, fare un nodo semplice con la cinghia in eccesso direttamente sotto la fibbia a sgancio rapido e il moschettone. Verificare che la/e estremità restante/i della cinghia sia/siano fissata/e e lontana/e dalla portata del paziente.

RIMOZIONE: Aprire il bracciale per liberare il paziente. Sganciare la cinghia di ancoraggio dal telaio del letto.

PER LIMITARE IL RANGE DI MOVIMENTO DELLE GAMBE (FIG. 10): Il medico che utilizza il metodo di applicazione incrociata della cinghia stabilisce cosa applicare prima (bracciale o cinghia) e quale estremità della contenzione deve incrociarsi.

1. Collegare il bracciale fissandolo sul lato inferiore destro del telaio, che si muove con il paziente, fuori dalla portata del paziente, alla caviglia sinistra.
2. Incrociare le cinghie e collegare il bracciale fissandolo sul lato inferiore sinistro del telaio, che si muove con il paziente, fuori dalla portata del paziente, alla caviglia destra.
3. Regolare le cinghie di connessione secondo necessità.



PRECAUZIONI:

- È necessario eseguire una valutazione clinica per decidere se utilizzare il dispositivo insieme alle linee di monitoraggio o nel caso in cui il paziente abbia un arto ferito o lussato/fratturato.
- Controllare regolarmente il paziente per verificare che la circolazione del sangue non sia compromessa. Possono verificarsi lesioni gravi se i bracciali limitano la circolazione del sangue quando viene applicato il supporto per l'arto.

AVVERTENZA: potrebbe essere necessario utilizzare strumenti di contenzione aggiuntivi o diversi per gli arti o il corpo (visitare tidiproducts.com):

- Alcuni pazienti possono richiedere ulteriori interventi in aggiunta a una contenzione al fine di prevenire lesioni a se stessi o ad altri
 - Se il paziente tira violentemente le cinghie del letto.
 - Per ridurre il rischio che il paziente abbia accesso alla sede di linee venose, ferite o tubi.
 - Per evitare che il paziente si agiti o sobbalzi causando lesioni a sé stesso.
- Spetta al medico decidere quando un sistema di contenzione non è più considerato sicuro.

SICUREZZA DEL LETTO: Fare riferimento alla Food and Drug Administration (FDA) o ad altri enti governativi al di fuori degli Stati Uniti per le più recenti linee guida sulla sicurezza dei letti ospedalieri e le istruzioni per l'uso del fabbricante del letto.

IT Segnalare eventuali incidenti gravi correlati all'uso del dispositivo a TIDI Products e all'autorità competente dello stato membro. | Le traduzioni del presente documento in francese, spagnolo, olandese, tedesco, italiano e portoghese sono disponibili sul sito www.tidiproducts.com/IFU.

ULTERIORI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E IL LAVAGGIO SONO DISPONIBILI SUL RETRO.



Posey® Twice-As-Tough® manchetten 2790, 2790Q

Instructies voor het aanbrengen op de pols en enkel



Uitsluitend op voorschrift.

PRODUCTOMSCHRIJVING: gevoerde hulpmiddelen voor immobilisatie van ledematen met dubbel beveiligde sluiting. Uitsluitend voor gebruik met een bed of stretcher.

BESTEMD GEBRUIK:

- Voor het beperken van de bewegingsvrijheid van ledematen op een bed of brancard bij patiënten die volgens beoordeling risico lopen op verstoring van levensreddende behandeling (bijv. chronisch lostrekken van slangen) of bij wie het risico bestaat dat ze zichzelf of anderen verwonden.
- Volg het beleid en de procedures van uw ziekenhuis inzake immobilisatie die in overeenstemming zijn met de CMS-richtlijnen en staatswetgeving in de VS, of van andere bestuursorganen buiten de VS.

CONTRA-INDICATIES: Geen

GBRUIKINSTRUCTIES: De volgorde voor het aanbrengen of verwijderen van de riemen aan het bed OF de manchet bij de patiënt wordt bepaald door de arts. Gebruik methode a. of b. hieronder om riemen aan het frame te bevestigen. Volg deze stappen om het hulpmiddel toe te passen (stap 1-3 aan beide kanten uitvoeren):

1a. Driehoeksmethode om het bewegingsbereik van de patiënt te beperken: maak de riempjes los van elkaar en bevestig deze op verschillende punten aan het frame dat met de patiënt meebeweegt (afb. 1) buiten bereik van de patiënt (niet bevestigen aan de zijrails of het hoofd-/voeteneinde) (afb. 2).

1b. Het bewegingsbereik van de patiënt vergroten: voeg de riempjes samen en bevestig deze aan één punt aan het frame dat met het patiënt meebeweegt, buiten bereik van de patiënt.

2. Voer de uiteinden van het riempje omlaag, aan de binnenkant van de zijrails, zodat ze niet in de weg zitten wanneer de zijrails worden geheven. Zorg ervoor dat de riempjes aan het frame zijn bevestigd dat met de patiënt meebeweegt (afb. 1) (niet bevestigen aan de zijrails of het hoofd-/voeteneinde), buiten bereik van de patiënt.

3. **2790:** Voer het uiteinde van het riempje over de bovenkant, minimaal een keer rond het frame en door het slot. Breng de riem terug over de eerste ring en door de tweede D-ring (afb. 3), of bevestig hem met een snelsluiting. Om ongewenste aanpassingen te beperken, maakt u een platte knoop met de overtollige riem direct onder de D-ring.

2790Q: Leid het uiteinde van de riem minstens één keer over de bovenkant, rond het frame, en sluit de snelsluiting. Luister of u een klik hoort. Trek stevig aan de riempjes om te verzekeren dat deze goed vastzitten (afb. 4). Als de gesp niet door een opening past, gebruikt u de alternatieve methode in afb. 5 door een lus te maken van de band en deze door de opening in het frame te halen, de gesp door de lus te steken en het mannelijke uiteinde op het vrouwelijke uiteinde van de gesp aan te sluiten. Sluit de snelontkoppelingsspes door het mannelijke uiteinde in het vrouwelijke uiteinde te schuiven (afb. 4). Leg nu, om verdere ongewenste verstelling te beperken, een overhandse knoop met het riemuiteinde direct onder de snelontkoppelingsspes.








AANBRENGEN VAN DE MANCHETTEN: (stap 1 t/m 3 aan beide kanten uitvoeren):

1. Wikkel het neopreenstuk om de enkel/pols zodat de gesp en het verbindingsriempje zich aan de zijde van de ulna van de pols bevinden of aan de zijde van de malleolus lateralis van de enkel. Bevestig de zwarte stukken klittenband op elkaar en trek aan het zwarte treklijpje op het blauwe pluizige stuk, en bevestig daarna de blauwe stukken klittenband op elkaar. Het pluizige stuk moet tussen de twee klittenbandgedeelten komen te liggen (afb. 6). Zorg dat de stukken ten minste 3 centimeter (1 inch) overlappen.

2. Druk de klittenbandsluiting stevig aan en controleer of deze goed blijft zitten. Schuif EEN vinger (plat) tussen de manchet en de binnenzijde van de enkel/pols van de patiënt om te verzekeren dat de manchet goed past (Afb. 7).

3. **2790:** Voer het uiteinde van het riempje voor ledematen over de bovenkant van de manchet heen en door de twee D-ringen op de manchet. Haal het riempje terug over de eerste ring en door de tweede D-ring op de manchet. Schuif EEN vinger (plat) tussen de manchet en de riem.

2790Q: sluit de snelontkoppelingsspes op de manchet. Steek EEN vinger (plat) onder de gesp en trek het riempje strak, maar niet zo strak dat de bloedsomloop wordt belemmerd (afb. 8). Maak de snelontkoppelingsspes los, draai de gesp 180°, en sluit deze opnieuw (afb. 9). Luister of u een klik hoort.

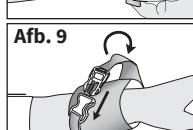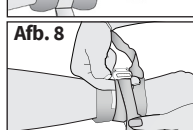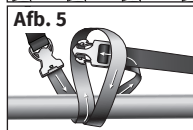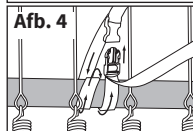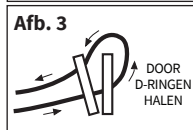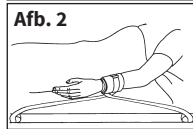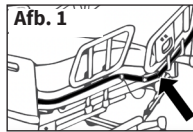

2790



2790Q

POSEY TWICE-AS-TOUGH LEDEMAATHOUDERMANCHETTEN:

REF 2790 D-ring manchet (enkele riem met slot), normaal/blauw

REF 2790Q Manchet met snelsluiting (dubbele riem met snelsluiting), normaal/blauw

LENGTE VAN HET RIEMPJE AANPASSEN: Pas de lengte van het/de verbindingsriempje(s) vanaf het frame aan zodat de gewenste bewegingsvrijheid wordt verkregen zonder dat dit de veiligheid van de patiënt of zorgverlener in gevaar brengt. Leg nu, om verdere ongewenste verstelling te beperken, een overhandse knoop met het riemuiteinde direct onder de snelontkoppelingsspes en D-ring. Zorg dat het/de resterende riemuiteinde(n) buiten bereik van de patiënt wordt/worden vastgezet.

VERWIJDEREN: Maak de manchet los van de patiënt. Maak het bevestigingsriempje los van het bedframe.

OM HET BEWEGINGSBEREIK VAN DE ONDERSTE LEDEMATEN VOOR DE BENEN TE BEPERKEN (AFB. 10): De arts die de gekruiste aanbrengmethode van de riem toepast, kan bepalen welke het eerst wordt aangebracht (manchet of riem) en welk uiteinde van de riem gekruist wordt.

1. ABevestig de manchet die rechtsonder, buiten bereik van de patiënt, aan het frame dat met de patiënt meebeweegt is bevestigd, rond de linkerenkel.
2. Kruis de riemen en bevestig de manchet die linksonder, buiten bereik van de patiënt, aan het frame dat met de patiënt meebeweegt is bevestigd, rond de rechterenkel.
3. Verstel de verbindingsriemen zo nodig.



VOORZORGSMAATREGELEN:

- Een klinische beoordeling en beslissing zijn vereist wanneer het hulpmiddel wordt gebruikt met bewakingslijnen of als de patiënt een wond of een ontwrichte/ gebroken ledemaat heeft.
- Controleer de patiënt regelmatig om te verzekeren dat de bloedsomloop niet wordt belemmerd. Als de ledemaathouder wordt gebruikt en de bloedsomloop door de manchetten wordt belemmerd, kan dat ernstig letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING: Mogelijk zijn aanvullende of andere hulpmiddelen voor immobilisatie van lichaam of ledematen vereist (ga naar tidiproducs.com):

- Bij sommige patiënten zijn in combinatie met fixatie eventueel aanvullende maatregelen nodig om letsel bij zichzelf of anderen te voorkomen.
 - Als de patiënt met geweld aan de bedriemen trekt.
 - Om te helpen voorkomen dat de patiënt bij de plaats van de lijn/wond/tube kan komen.
 - Om te voorkomen dat de patiënt om zich heen slaat of onbeheerst omhoog en omlaag beweegt en zich hierdoor verwondt.
- De keuze wanneer fixatie niet langer als veilig wordt beschouwd, betreft een klinische beslissing.

BEDVEILIGHEID: Raadpleeg de Food and Drug Administration (FDA), of andere regelgevende instanties buiten de VS, voor de meest recente richtlijnen voor de veiligheid van ziekenhuisbedden en de gebruiksinstructies van de fabrikant van het bed.

NL

Meld een ernstig incident in verband met het gebruik van het hulpmiddel aan TIDI Products en de bevoegde instantie in de lidstaat. | Vertalingen van dit document in het Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Italiaans en Portugees vindt u op www.tidiproducs.com/IFU.

ZIE OMMEZIJDE VOOR AANVULLENDE VEILIGHEIDS- EN WASINSTRUCTIES.





Imobilizadores Posey® Twice-As-Tough® 2790, 2790Q

Instruções de aplicação no pulso e no tornozelo



Sujeito a prescrição

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Imobilizadores de membros almofadados com fecho de segurança dupla. Para utilização em camas e macas apenas.

USO PRETENDIDO:

- Para la protección de pacientes cuya evaluación indica un riesgo de interrupción de tratamientos de soporte vital (p. ej., tirando persistentemente de tubos) o un peligro de lesionarse a sí mismos o a otros, limitando el movimiento de las extremidades en camas o camillas.
- Siga as políticas e os procedimentos de imobilização do seu hospital que estejam em conformidade com as orientações CMS e a legislação estatal nos EUA, ou outras agências reguladoras fora dos EUA.

CONTRAINDICAÇÕES: Nenhuma

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO: A ordem da aplicação ou remoção das cintas na cama OU do imobilizador do doente deve ser determinada pelo médico. Para fixar as cintas à estrutura utilize o método a. ou b., descritos a seguir. Siga estes passos para aplicar o dispositivo (repita os passos 1–3 em cada lado):

1a. Processo de triangulação; para restringir a amplitude do movimento do doente: separe as cintas e fixe em diferentes pontos ao longo da estrutura que se move com o doente (Fig. 1), fora do alcance do doente (não fixe à guarda lateral nem ao painel da cabeça ou dos pés) (Fig. 2).

1b. Para aumentar a amplitude do movimento do doente: coloque as cintas juntas e fixe num único ponto ao longo de uma parte da estrutura que se move com o doente, fora do alcance do doente.

2. Passe as extremidades da cinta, para baixo, através da parte interior das guardas laterais de modo a não interferirem quando as guardas laterais são levantadas. Certifique-se de que as cintas são fixadas à estrutura que se move com o doente (Fig. 1) (não fixe à guarda lateral nem ao painel da cabeça ou dos pés), fora do alcance do doente.

3. **2790:** Enfie a extremidade da cinta por cima, em torno da estrutura, pelo menos uma vez, e através dos dois anéis em D. Coloque a cinta para trás, sobre o primeiro anel e através do segundo anel em D (Fig. 3), ou prenda com um nó de libertação rápida. Para limitar ajustes indesejados, dê um nó simples utilizando o excesso de cinta diretamente abaixo do anel em D.

2790Q: Enfie a extremidade da cinta por cima, em torno da estrutura, pelo menos uma vez, e feche a fivela de abertura rápida. Preste atenção a um som de “encaixe”. Puxe com firmeza as cintas para assegurar uma boa conexão (Fig. 4). Se a fivela não encaixar numa abertura, utilize o método alternativo na Fig. 5 enlaçando a cinta através da abertura da estrutura, inserindo a fivela através do laço e fixando a fivela macho à fivela fêmea para fixar. Feche a fivela de abertura rápida deslizando a extremidade macho na extremidade fêmea (Fig. 4). Para limitar ajustes indesejados, dê um nó simples utilizando o excesso de cinta diretamente abaixo da fivela de abertura rápida.









APLICAR OS IMOBILIZADORES: (Repita os passos 1-3 para cada lado):

1. Enrole a peça de neopreno em torno do pulso/tornozelo, de forma a que a fivela e a cinta de conexão estejam sobre o lado cubital do pulso ou sobre o maléolo lateral do tornozelo. Junte as peças de velcro pretas e puxe a aba preta na peça de pelo azul, seguido das peças de velcro azuis. A peça de pelo deve ficar entre as duas peças de velcro (Fig. 6). Certifique-se de sobrepor pelo menos 3 cm (uma polegada).

2. Pressione o fecho de velcro com firmeza e certifique-se de que o mesmo adere firmemente. Deslize UM dedo (esticado) entre o imobilizador e a parte interna do pulso/tornozelo do doente para garantir que está corretamente ajustado (Fig. 7).

3. **2790:** Passe a extremidade da cinta do membro por cima do imobilizador e através dos dois anéis em D no imobilizador. Coloque a cinta para trás, sobre o primeiro anel e através do segundo anel em D no imobilizador. Deslize UM dedo (esticado) entre o imobilizador e a cinta.

2790Q: Feche a fivela de abertura rápida no imobilizador. Insira UM dedo (esticado) sob a fivela e puxe a cinta até ficar ajustada, mas não demasiado apertada ao ponto de restringir a circulação (Fig. 8). Liberte a fivela de abertura rápida, rode a fivela 180° e volte a conectar (Fig. 9). Preste atenção a um som de “encaixe”.

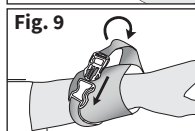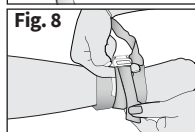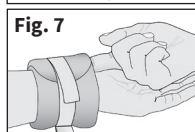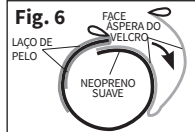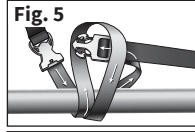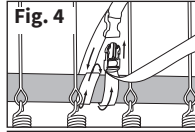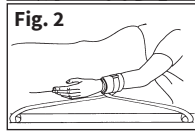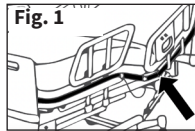

2790



2790Q

IMOBILIZADOR DE MEMBROS POSEY TWICE-AS-TOUGH:

REF 2790 Imobilizador com anel em D (cinta dupla com anéis em D), regular/azul

REF 2790Q Imobilizador com fivela de abertura rápida (cinta dupla com fivelas de abertura rápida), regular/azul

AJUSTE DO COMPRIMENTO DA CINTA: Ajuste o comprimento da(s) tira(s) de conexão desde a estrutura para permitir a liberdade de movimento pretendida, sem comprometer a segurança do doente ou do cuidador. Para limitar ajustes indesejados, dê um nó simples utilizando o excesso de cinta diretamente abaixo da fivela de abertura rápida e do anel em D. Assegure-se de que a(s) extremidade(s) das cintas remanescentes estão fixas e fora do alcance do doente.

PARA REMOVER: Solte o imobilizador do doente. Solte a cinta de ancoragem da estrutura da cama.

PARA LIMITAÇÃO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES AO NÍVEL DAS PERNAS (FIG. 10): O médico que efetua o método de aplicação cruzada da cinta pode determinar o que deve ser aplicado em primeiro lugar (o imobilizador ou a cinta) e qual a extremidade da restrição que será cruzada.

1. Cruze as cintas e conecte o imobilizador que está fixo no lado inferior direito da estrutura que se move com o doente, fora do alcance do mesmo, ao tornozelo esquerdo.
2. Cruze as cintas e conecte o imobilizador que está fixo no lado inferior esquerdo da estrutura que se move com o doente, fora do alcance do mesmo, ao tornozelo direito.
3. Ajuste as cintas de conexão conforme necessário.



PRECAUÇÕES:

- São necessárias uma avaliação e uma decisão clínicas ao utilizar com linhas de monitorização ou se o doente tiver um membro com luxação/fratura.
- Avalie o doente regularmente para assegurar-se de que a circulação não é comprometida. Poderá ocorrer uma lesão grave se os imobilizadores restringirem a circulação ao aplicar imobilização de membros.

ADVERTÊNCIA: Poderão ser necessários imobilizadores do corpo ou dos membros adicionais ou diferentes (visite tidiproducts.com):

- Alguns doentes podem necessitar de intervenções adicionais juntamente com um imobilizador, de modo a evitar lesões a si próprios ou a outros.
 - Se o doente puxar violentamente as cintas da cama.
 - Para reduzir o risco de o doente conseguir ter acesso ao local das linhas/feridas/tubos.
 - Para evitar que o doente se agite ou sacuda de um lado para o outro e se lesione.
- É uma decisão clínica decidir quando um imobilizador já não é considerado seguro.

SEGURANÇA DAS CAMAS: Consulte a Food and Drug Administration (FDA), ou outras agências reguladoras fora dos EUA, para obter as mais recentes orientações sobre segurança de camas hospitalares, bem como as instruções de utilização do fabricante das camas.

PT Deve comunicar qualquer incidente grave relacionado com a utilização do dispositivo à TIDI Products e à autoridade competente do Estado-Membro. | Traduções deste documento em francês, espanhol, holandês, alemão, italiano e português encontram-se em www.tidiproducts.com/IFU.

INSTRUÇÕES ADICIONAIS DE SEGURANÇA E LAVAGEM NO VERSO.




For RX PRODUCTS ONLY. Federal law (USA) restricts RX devices to sale by or on order of a physician. For use in a licensed healthcare facility only.

STAFF TRAINING: TIDI offers in-service training aids at no charge. Contact TIDI online at www.tidiproducts.com or call toll-free at 1.800.521.1314.

BEFORE APPLYING ANY RESTRAINT: Follow your hospital's restraint policies and procedures that are compliant with USA CMS guidelines and state laws or other governing agencies outside the USA.

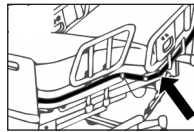


⚠️ ADDITIONAL WARNINGS:

1. ALWAYS monitor patient per facility policy. Improper application or use of any restraint may result in serious injury or death. Be aware that constant monitoring may be required for:
 - Aggressive or agitated patients; and
 - Patients in a supine position; ensure that being in this position would not cause any complications for those who are at risk of vomiting while being restrained.
2. NEVER alter or repair this product. ALWAYS inspect before each use: Check for broken stitches or parts; torn, cut or frayed material; or locks, buckles, or hook-and-loop fasteners that do not hold securely. DO NOT use soiled or damaged products. Doing so may result in serious injury or death. Dispose of damaged products per facility policy for BIOHAZARDOUS material.
3. ALWAYS secure straps to a part of the frame that moves with the patient (not foot/head board or siderails), out of the patients reach, using quick-release ties (see drawing below) or buckles. These allow easy release in the event of an accident or fire.  Test to make sure straps cannot tighten, loosen, or slip and create excess slack. If this occurs, the patient may slide off the chair or bed, increasing the risk of serious injury or suffocation. Restraint release is an important part of facility fire and disaster drills. Straps can be cut with scissors in an emergency.
4. NEVER secure restraint strap to side rail or head/foot board.
5. NEVER use Posey products on toilets, or on any chair or furniture that does not allow proper application as directed in the Application Instructions. DO NOT use at home.
6. NEVER expose this product to open flame, fire, smoking materials, or high heat sources. Some products may melt or ignite and burn. The facility smoking/no smoking policy should be strictly enforced.
7. NEVER use a Posey product as a seat belt in a moving vehicle. Posey products are not designed to withstand the force of a crash or sudden stop.
8. Test Zippers or hook-and-loop fasteners before each use. DISCARD device if it does not fasten securely.

LAUNDERING INSTRUCTIONS (if applicable):

- Fasten all buckles and locks to reduce risk of damage during wash and dry cycles. DO NOT put buckles or locks through extractors. For maximum life, launder in a laundry bag.
- Stainless Steel Locks: Posey recommends that locks be treated with a dryfilm lubricant (silicone) after each cleaning. For best results, spray a small amount into the lock. Work the action of the lock with a key several times to ensure that all the surfaces are well lubricated.
- Before laundering, zip up and turn the product inside out to protect zipper.
- Hook-and-loop fasteners may collect lint after repeated use or laundering, reducing grip strength. Fasten the "hook" to the "loop" before laundering to help prevent lint buildup. As needed, use a stiff-bristle brush to remove lint from the "hook" side.

• These products, other than foam products, can be machine washed under CDC guidelines for material soiled with blood or bodily fluid.

- For non-contaminated material, use lower temperature wash and dry cycles to extend product life.

• For foam products:


  

- Make sure products are completely dry before use.

STORAGE AND HANDLING:

- This device is designed for use in normal indoor environments.
- This device may be stored in ambient warehouse temperatures at normal humidity levels. Avoid excess moisture or high humidity that may damage product materials.

HOW TO TIE THE POSEY QUICK-RELEASE TIE

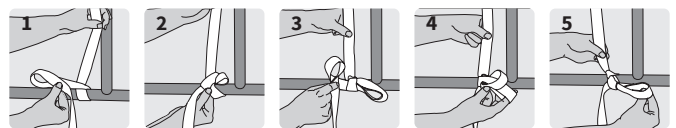

1. Wrap strap once around the frame that moves with the patient (do not attach to side rail or head/footboard), leaving at least an 8" (20 cm) tail. Fold the loose end in half to create a loop and cross it over the other end.
2. Insert the folded strap where the straps cross over each other, as if tying a shoelace. Pull on the loop to tighten.
3. Fold the loose end in half to create a second loop.
4. Insert the second loop into the first loop.
5. Pull on the loop to tighten. Test to make sure strap is secure and will not slide in any direction.
6. Repeat on other side. Practice quick-release ties to ensure the knot releases with one pull on the loose end of the strap.

EN

Report any serious incident related to device use to TIDI Products and the Member State Competent Authority. | Translations of this document in French, Spanish, Dutch, German, Italian, and Portuguese are located at www.tidiproducts.com/IFU.

DISPOSAL: Dispose of product according to local or facility guidelines if product is worn or damaged.



NUR für PRODUKTE MIT RX-KENNZEICHNUNG. Laut dem US-amerikanischen Bundesgesetz dürfen verschreibungspflichtige Produkte nur von Ärzten oder auf deren Anordnung verkauft werden. Nur zur Verwendung in einer lizenzierten Gesundheitseinrichtung.

PERSONALSCHULUNG: TIDI bietet kostenlose Schulungshilfen an. Kontaktieren Sie TIDI online unter www.tidiproducts.com oder rufen Sie in den USA gebührenfrei unter 1.800.521.1314 an.

VOR DEM ANLEGEN JEDLICHER RÜCKHALTEVORRICHTUNGEN: Befolgen Sie die in Ihrem Krankenhaus geltenden Richtlinien und Verfahren zur Fixierung, die die CMS-Richtlinien und bundesstaatlichen Gesetze in den USA oder denen der zuständigen Autoritäten außerhalb der USA einhalten.


⚠️ ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE:

1. Den Patienten **IMMER** gemäß den Richtlinien der Einrichtung überwachen. Eine unsachgemäße Anwendung oder Handhabung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Beachten Sie, in den folgenden Fällen eine ständige Überwachung erforderlich sein kann:

- Patienten, die aggressiv oder unruhig sind; und
- Patienten, die sich in Rückenlage befinden. Vergewissern Sie sich, dass bei Patienten in dieser Position im Falle von Erbrechen während der Fixierung keine Komplikationen auftreten können.

2. Ändern oder reparieren Sie dieses Produkt **NIEMALS**. **IMMER** vor jedem Gebrauch prüfen: Vergewissern Sie sich, dass keine Nähte oder Teile beschädigt sind, das Material nicht gerissen, angeschnitten oder ausgefranst ist und dass alle Schlösser, Schnallen oder Klettverschlüsse sicher halten. Verwenden Sie **KEINE** verschmutzten oder beschädigten Produkte. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen. Entsorgen Sie beschädigte Produkte gemäß den Richtlinien für **BIOLOGISCH GEFÄHRLICHES** Material.

3. Sichern Sie die Gurte **IMMER** außerhalb der Reichweite des Patienten mithilfe der Schnellverschluss-Schlaufen (siehe Abbildung unten) an einem Teil des Bettrahmens, der mit dem Patienten bewegt wird (nicht am Fuß-/Kopfteil oder an den Seitenleisten). Der Schnellverschluss ermöglicht ein leichtes Lösen im Falle eines Unfalls oder Brandes. Überprüfen Sie, dass die Gurte sich nicht festziehen, lösen oder verrutschen und dass sie nicht übermäßig locker sind. In diesem Fall kann der Patient vom Stuhl oder Bett rutschen, was das Risiko schwerer Verletzungen oder Erstickungen erhöht. Das Lösen von Rückhaltevorrichtungen ist ein wichtiger Bestandteil von Brand- und Katastrophenübungen. Die Gurte können im Notfall mit einer Schere durchgeschnitten werden.

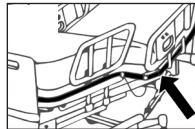

4. Befestigen Sie einen Rückhaltegurt **NIEMALS** an einer Seitenleiste oder am Fuß-/Kopfteil.
5. Verwenden Sie Posey-Produkte **NIEMALS** auf Toiletten, Stühlen oder Möbeln, die eine ordnungsgemäße Anwendung gemäß den Anweisungen in der Anwendungsanleitung nicht zulassen. **NICHT** zu Hause verwenden.
6. Setzen Sie dieses Produkt **NIEMALS** offenen Flammen, Feuer, rauchenden Materialien oder starken Hitzequellen aus. Einige Produkte können schmelzen oder sich entzünden und verbrennen. Die Raucher-/Nichtraucherpolitik Ihrer Einrichtung sollte strikt eingehalten werden.
7. Ein Posey Produkt darf **NIEMALS** als Sicherheitsgurt in einem fahrenden Fahrzeug verwendet werden. Posey Produkte sind nicht dafür konzipiert, der Kraft eines Crashes oder plötzlichen Stopps standzuhalten.
8. Testen Sie Reißverschlüsse oder Klettverschlüsse vor jedem Gebrauch. **ENTSORGEN** Sie das Produkt, wenn es nicht sicher befestigt werden kann.

ANLEITUNG ZUM WASCHEN (falls zutreffend):

- Schließen Sie alle Schnallen und Schlösser, um das Risiko einer Beschädigung während des Wasch- und Trockenvorgangs zu verringern. **KEINE** Schnallen oder Schlösser durch Extraktoren stecken. Für maximale Lebensdauer in einem Wäschesack waschen.
- Edelstahl-Schlösser: Posey empfiehlt, die Schlösser nach jeder Reinigung mit einem Trockenschmiermittel (Silikon) zu behandeln. Sprühen Sie eine kleine Menge des Schmiermittels in das Schloss, um das beste Ergebnis zu erzielen. Betätigen Sie den Schließmechanismus des Schlosses mehrere Male mit dem Schlüssel, um sicherzustellen, dass alle Oberflächen gut abgeschmiert sind.
- Vor dem Waschen sollten Sie den Reißverschluss hochziehen und das Produkt von innen nach außen drehen, um den Reißverschluss zu schützen.
- Klettverschlüsse können nach mehrmaligem Gebrauch oder Waschen Fusseln aufnehmen und so die Griffestigkeit verringern. Befestigen Sie den „Haken“ vor dem Waschen an der „Schlaufe“, um Fusselbildung zu vermeiden. Bei Bedarf Fusseln von der „Hakenseite“ mithilfe einer Bürste mit harten Borsten entfernen.

• Diese Produkte, mit Ausnahme von Schaumstoffprodukten, können nach den CDC Richtlinien für mit Blut oder Körperflüssigkeit verschmutztes Material in der Waschmaschine gewaschen werden.



- Für nicht kontaminiertes Material verwenden Sie Wasch- und Trockenzyklen bei niedrigerer Temperatur, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

• Für Schaumstoffprodukte:




- Stellen Sie sicher, dass die Produkte vor der Verwendung vollständig trocken sind.

LAGERUNG UND HANDHABUNG:

- Dieses Produkt ist für den Einsatz in normalen Innenräumen konzipiert.
- Dieses Produkt kann bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Das Produkt vor übermäßiger Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit schützen, da es dadurch beschädigt werden kann.

SO BINDEN SIE DIE POSEY SCHNELLVERSCHLUSS-SCHLAUFE

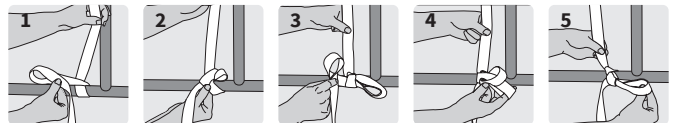

1. Wickeln Sie den Gurt einmal um den Bettrahmen, der mit dem Patienten bewegt wird (nicht an Seitenschiene oder Kopf-/Fußende befestigen), und lassen Sie dabei mindestens ein 20 cm langes Endstück zurück. Falten Sie das lose Ende in der Mitte, um eine Schlaufe zu bilden, und kreuzen Sie es über das andere Ende.
2. Legen Sie den gefalteten Gurt dort ein, wo sich die Bänder kreuzen, als ob Sie einen Schnürsenkel binden würden. Zum Festziehen an der Schlaufe ziehen.
3. Falten Sie das lose Ende in der Mitte, um eine zweite Schlaufe zu bilden.
4. Fügen Sie die zweite Schleife in die erste Schleife ein.
5. Zum Festziehen an der Schlaufe ziehen. Vergewissern Sie sich, dass der Gurt fest sitzt und in keine Richtung verrutschen kann.
6. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. Üben Sie das schnelle Öffnen, um sicherzustellen, dass sich der Knoten mit einem Zug am losen Ende des Riemens löst.

DE

Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit der Verwendung der Vorrichtung an TIDI Products sowie an die zuständige Behörde des Mitgliedsstaates. | Übersetzungen dieses Dokuments in die Sprachen Französisch, Spanisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch und Portugiesisch finden Sie auf www.tidiproducts.com/IFU.

ENTSORGUNG: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen und den einrichtungsinternen Richtlinien, wenn das Produkt abgenutzt oder beschädigt ist.




ÚNICAMENTE PARA PRODUCTOS DE VENTA CON RECETA MÉDICA. La legislación federal de EE. UU. autoriza la venta exclusivamente a médicos o por orden de estos. Para uso exclusivo en centros sanitarios autorizados.

FORMACIÓN DEL PERSONAL: TIDI ofrece ayuda formativa interna de forma gratuita. Póngase en contacto con TIDI a través de www.tidiproducts.com o llame al número gratuito 1.800.521.1314.

ANTES DE APLICAR LAS SUJECIONES: Siga las políticas y procedimientos de sujeción de su hospital que cumplan con las directrices de los CMS de EE. UU. y las leyes estatales, u otros organismos gubernamentales fuera de los EE. UU.

⚠️ ADVERTENCIAS ADICIONALES:

- Supervise SIEMPRE al paciente según la política del centro. Una aplicación o uso inadecuados de una sujeción puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. Tenga en cuenta que se requerirá una supervisión constante para:
 - pacientes agresivos o inquietos, y
 - pacientes en decúbito supino (asegúrese de que esta posición no provoque ninguna complicación para aquellas personas en riesgo de vomitar mientras estén sujetas).
- NUNCA altere ni repare este producto. Inspecciónelo SIEMPRE antes de cada uso: busque costuras o partes rotas, material rasgado, cortado o deshilachado y compruebe si los bloqueos, hebillas o cierres de velcro no sujetan firmemente. NO use productos dañados o sucios. Hacerlo puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. Elimine el producto según las políticas del centro sobre materiales CON RIESGO BIOLÓGICO.
- SIEMPRE fije las correas a una parte del marco que se mueva con el paciente (no al cabecero, el estribo o los laterales), fuera del alcance de los pacientes y usando bridas o hebillas de liberación rápida (consulte la imagen a continuación). De esta forma se pueden liberar rápidamente en caso de accidente o incendio. Pruébelas para asegurarse de que las correas no se pueden apretar, aflojar o resbalar y que no se pueda crear holgura excesiva. Si esto ocurre, el paciente podrá deslizarse de la silla o la cama, lo que aumenta el riesgo de lesión grave o asfixia. La liberación de la sujeción es una parte importante de los simulacros de incendios y catástrofes de los centros. Las correas se pueden cortar con tijeras en caso de emergencia.
- NNUNCA fije una correa de sujeción a un lateral o al cabecero o estribo de la cama.
- NUNCA use los productos de Posey en inodoros, sillas o mobiliario que no permita una correcta aplicación como se indica en las instrucciones de aplicación. NO use el producto en casa.
- NUNCA exponga el producto a llamas abiertas, fuego, materiales humeantes o fuentes de calor. Algunos productos pueden derretirse o prenderse y quemarse. Se deberá aplicar estrictamente la política relativa a la prohibición de fumar del centro.
- NUNCA use un producto de Posey como cinturón de seguridad en un vehículo en movimiento. Los productos de Posey no están diseñados para resistir la fuerza de una colisión o una parada repentina.
- Pruebe las cremalleras y los cierres de velcro antes de cada uso. ELIMINE el producto si no se sujeta firmemente.

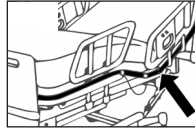

INSTRUCCIONES DE LAVADO (cuando proceda):

- Sujete todas las hebillas y bloqueos para reducir el riesgo de daño durante los ciclos de lavado y secado. NO pase las hebillas ni los bloqueos por extractores. Para una máxima vida útil, lave los productos en una bolsa para lavado.
- Bloqueos de acero inoxidable: Posey recomienda tratar los bloqueos con un lubricante de película seca (silicona) tras cada lavado. Para obtener un resultado óptimo, pulverice una pequeña cantidad en el bloqueo. Haga funcionar el mecanismo del bloqueo con una llave varias veces para asegurarse de que todas las superficies estén lubricadas.
- Antes de lavarlo, cierre la cremallera y ponga el producto del revés para protegerla.
- Es posible que los cierres de velcro acumulen pelusa tras un uso repetido o el lavado, lo que reduce la fuerza de agarre. Cíerrelos antes de lavarlos para evitar la acumulación de pelusa. Si es necesario, use un cepillo de cerda dura para retirar la pelusa del velcro.

• Todos los productos que no sean de espuma se pueden lavar a máquina de acuerdo con las pautas de los CDC sobre material manchado de sangre o líquidos corporales.



- En el caso de los materiales no contaminados, ponga ciclos de lavado y secado a una temperatura menor para ampliar la vida útil del producto.

- Para productos de espuma:




- Asegúrese de que los productos estén completamente secos antes de su uso.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

- Este producto está diseñado para su uso en entornos interiores normales.
- Este producto puede almacenarse a temperatura ambiente de almacén a niveles de humedad normales. Evite el exceso de humedad o alta humedad que pueda dañar los materiales del producto.

CÓMO ATAR LA BRIDA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POSEY

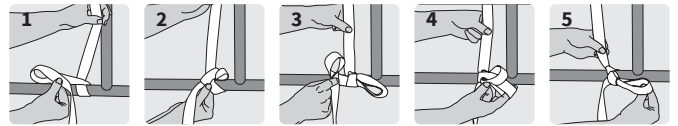

- Enrolle la correa una vez alrededor del marco que se mueve con el paciente (no la sujete a los laterales ni al cabecero o al estribo de la cama). Deje un extremo suelto de unos 20 cm como mínimo. Pliegue por la mitad el extremo suelto para crear un lazo y crúcelo por el otro extremo.
- Inserte la correa plegada donde las correas se cruzan entre sí, como si atara los cordones de unos zapatos. Tire del lazo para tensarlo.
- Pliegue por la mitad el extremo suelto para crear un segundo lazo.
- Inserte el segundo lazo en el primer lazo.
- Tire del lazo para tensarlo. Pruébelo para asegurarse de que la correa esté fija y no se resbale a ninguna dirección.
- Repita en el otro lado. Pruebe las bridas de liberación rápida para garantizar que el nudo se libere al tirar del extremo suelto de la correa.

ES

Informe de cualquier incidente grave relacionado con el uso del dispositivo a TIDI Products y a la autoridad competente del Estado miembro. | Las traducciones de este documento en francés, español, holandés, alemán, italiano y portugués se encuentran en www.tidiproducts.com/IFU.

ELIMINACIÓN: Deseche el producto de acuerdo con las directrices locales o del centro si el producto está desgastado o dañado.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 EE. UU.
Teléfono: 1.800.521.1314 • Internacional: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com

© 2023 TIDI Products, LLC. Reservados todos los derechos.
Posey es una marca registrada de TIDI Products, LLC.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Alemania



UK Persona Responsable:
Emurgo Consulting (UK) Limited
c/o CR360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Reino Unido



19200B REV G 2023-11-09



PRODUITS EXCLUSIVEMENT DÉLIVRÉS SUR PRESCRIPTION. La loi fédérale des États-Unis n'autorise la vente des dispositifs sur ordonnance que par un médecin ou sur ordonnance. Exclusivement destiné à une utilisation dans un établissement de santé agréé.

FORMATION DU PERSONNEL: TIDI propose des aides gratuites à la formation en cours d'emploi. Veuillez contacter TIDI en ligne à l'adresse suivante: www.tidiproducts.com ou gratuitement par téléphone au numéro suivant: 1 800 521 1314.

AVANT D'APPLIQUER LA CONTENTION: Veuillez suivre les politiques et les procédures de contention de votre hôpital, qui sont en conformité avec les directives des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), les lois locales des États-Unis ou, en dehors des États-Unis, des autorités compétentes.

⚠ MISES EN GARDE SUPPLÉMENTAIRES:

- TOUJOURS surveiller le patient conformément à la politique de l'établissement. L'application ou l'utilisation inappropriées d'un dispositif de contention peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Une surveillance constante peut être nécessaire pour:
 - les patients agressifs ou agités, et
 - les patients en décubitus dorsal; veuillez vous assurer que cette position n'entraîne pas des complications chez les patients risquant de vomir pendant la contention.
- NE JAMAIS altérer ou réparer ce produit. TOUJOURS l'inspecter avant son utilisation: déterminer si le produit comporte des coutures ou des pièces endommagées; du matériau déchiré, coupé ou effiloché; ou verrous, boucles ou attaches à boucles et à crochets qui ne s'attachent pas bien. NE PAS utiliser des produits souillés ou endommagés. Cela pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort. Se débarrasser des produits endommagés conformément à la politique de l'établissement en matière de matériaux BIOLOGIQUEMENT DANGEREUX.
- TOUJOURS attacher les sangles à une partie du cadre qui se déplace avec le patient (et non au pied ou à la tête de lit ou aux rails latéraux), hors de portée de patient, à l'aide d'attaches à dégagement rapide (voir dessin ci-dessous) ou de boucles. Celles-ci permettront une libération facile en cas d'accident ou d'incendie. Tester pour s'assurer que les sangles ne peuvent pas se serrer, se desserrer ou glisser et devenir trop lâches. Si cela se produit, le patient peut glisser de la chaise ou du lit, et risquer des blessures graves ou la suffocation. L'ouverture des dispositifs de contention est une partie importante des exercices de secours en cas d'incendie et de catastrophe. Les sangles peuvent être coupées avec des ciseaux en cas d'urgence.
 
- NE JAMAIS fixer les sangles au rail latéral, à la tête ou au pied du lit.
- NE JAMAIS utiliser de produits Posey sur des toilettes ou encore sur des sièges ou des meubles qui ne permettent pas leur application conformément aux instructions d'application. NE PAS utiliser à domicile.
- NE JAMAIS exposer ce produit à une flamme nue, un feu, des matériaux en combustion ou des sources de chaleur élevée. Certains produits peuvent fondre ou s'enflammer et brûler. La politique de l'établissement en matière de tabagisme doit être strictement appliquée.
- NE JAMAIS utiliser un produit Posey comme ceinture de sécurité dans un véhicule en mouvement. Les produits Posey ne sont pas conçus pour résister à la force d'un accident ou d'un arrêt soudain.
- Tester les fermetures à glissière ou les attaches à boucles et à crochets avant chaque utilisation. JETER le dispositif s'il ne peut pas s'attacher solidement.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE (le cas échéant):

- Attacher toutes les boucles et serrures pour réduire les risques de dommages pendant les cycles de lavage et de séchage. NE PAS mettre de boucles ou de verrous dans des extracteurs. Pour maximiser la durée de vie du produit, le laver dans un sac à linge.
- Serrures en acier inoxydable: Posey recommande de traiter les serrures avec un lubrifiant à film sec (silicone) après chaque nettoyage. Pour de meilleurs résultats, pulvériser une petite quantité dans la serrure. Faire fonctionner la serrure plusieurs fois avec une clé afin de s'assurer que toutes les surfaces ont bien été lubrifiées.
- Avant de laver le produit, le fermer et le retourner pour protéger la fermeture à glissière.
- Des peluches peuvent s'accumuler sur les attaches à boucles et crochets après un usage répété ou un lavage, réduisant ainsi la force de préhension. Attacher le « crochet » à la « boucle » avant le lavage pour éviter l'accumulation de peluches. Le cas échéant, utiliser une brosse à poils rigides pour retirer les peluches du côté « crochet ».

Ces produits, à l'exception des produits en mousse, peuvent être lavés à la machine selon les directives du CDC pour les produits souillés de sang ou de fluides corporels.



- Pour les matériaux non contaminés, utiliser des cycles de lavage et de séchage à basse température pour prolonger la durée de vie du produit.

- Pour les produits en mousse:




- Assurez-vous que les produits sont entièrement secs avant de les utiliser.

STOCKAGE ET MANIPULATION:

- Ce dispositif est conçu pour être utilisé dans des environnements d'intérieur normaux.
- Ce dispositif peut être stocké à des températures ambiantes à des niveaux d'humidité normaux. Éviter des environnements aux taux d'humidité élevés qui pourraient endommager les matériaux du produit.

COMMENT FIXER LES ATTACHES À DÉGAGEMENT RAPIDE POSEY

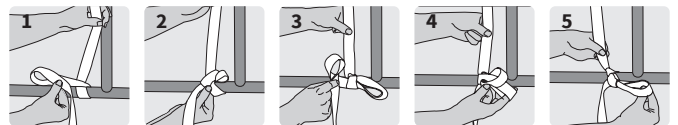

- Enrouler une fois la sangle autour du cadre qui se déplace avec le patient (ne pas l'attacher au rail latéral ou à la tête/au pied de lit), en laissant au moins une longueur de 8 pouces (20 cm). Plier l'extrémité libre en deux pour créer une boucle et la croiser sur l'autre extrémité.
- Insérer la sangle pliée à l'endroit où les sangles se croisent, comme pour attacher un lacet de chaussure. Tirer sur la boucle pour serrer.
- Plier l'extrémité libre en deux pour créer une seconde boucle.
- Insérer la seconde boucle dans la première boucle.
- Tirer sur la boucle pour serrer. Tester pour s'assurer que la sangle est bien fixée et ne glissera dans aucune direction.
- Répéter de l'autre côté. Tester les attaches à dégagement rapide pour s'assurer que le noeud se libère en tirant sur l'extrémité libre de la sangle.

FR

Signalez tout incident grave lié à l'utilisation de ce dispositif à TIDI Products et à l'autorité compétente de l'État membre. | Les traductions de ce document en allemand, espagnol, français, italien, néerlandais et portugais sont disponibles sur le site www.tidiproducts.com/IFU.

ÉLIMINATION: Si le produit est usé ou endommagé, l'éliminer conformément aux directives locales ou de l'établissement.




SOLO PER PRODOTTI SU PRESCRIZIONE. La legge federale (USA) limita la vendita dei dispositivi su prescrizione ai medici o su presentazione di richiesta medica. Esclusivamente per l'uso in una struttura sanitaria approvata.

FORMAZIONE DEL PERSONALE: TIDI offre servizi di formazione intraziendale gratuiti. Contattare TIDI online all'indirizzo www.tidiprodotti.com o chiamare il numero verde (in USA) 1.800.521.1314.

PRIMA DI APPLICARE QUALSIASI MISURA DI CONTENZIONE: Seguire le politiche e le procedure di contenzione dell'ospedale conformi alle linee guida dei CMS statunitensi e alle normative statali o di altri enti governativi al di fuori degli Stati Uniti.

⚠️ ULTERIORI AVVERTENZE:

- Monitorare SEMPRE il paziente in conformità alle politiche della struttura. L'applicazione o l'uso errati di qualsiasi misura di contenzione possono causare lesioni gravi o la morte. Potrebbe essere necessario un monitoraggio costante per:
 - Pazienti aggressivi o agitati; e
 - Pazienti in posizione supina; assicurare che la posizione non causi complicazioni a chi è a rischio di vomito durante la contenzione.
- Non modificare o riparare MAI questo prodotto. Ispezionare SEMPRE prima di ogni utilizzo: controllare che non siano presenti punti o parti rotti, materiale lacerato, tagliato o usurato oppure chiusure, fibbie e fissaggi con velcro che non bloccano in modo sicuro. NON utilizzare prodotti sporchi o danneggiati onde evitare di provocare lesioni gravi o la morte. Smaltire i prodotti danneggiati in conformità alle politiche della struttura per i materiali A RISCHIO BIOLOGICO.
- Fissare SEMPRE le cinghie a una parte del telaio che si muove con il paziente (non pediera/testiera o sponde laterali), al di fuori della portata del paziente, utilizzando legature a sgancio rapido (vedere il disegno di seguito) o fibbie che permettano un facile rilascio in caso di incidente o di incendio. Verificare che le cinghie non possano stringersi, allentarsi o scivolare creando un lasco eccessivo. In tal caso, il paziente potrebbe scivolare dalla sedia o dal letto, aumentando il rischio di lesioni gravi o soffocamento. Il rilascio della contenzione è una parte importante delle esercitazioni antincendio e anticalamità di una struttura. In caso di emergenza, le cinghie possono essere tagliate con le forbici.
- Non fissare MAI la cinghia di contenzione alle sponde laterali o alla testiera/pediera.
- Non utilizzare MAI i prodotti Posey su tazze del WC o su qualsiasi sedia o mobile che non permetta una corretta applicazione, descritta nelle istruzioni di applicazione. NON utilizzare a casa.
- Non esporre MAI il prodotto a fiamme aperte, fuoco, fumo o fonti di calore elevato. Alcuni prodotti possono fondersi o accendersi e bruciare. Rispettare rigorosamente le politiche di divieto del fumo della struttura.
- Non usare MAI un prodotto Posey come cintura di sicurezza in un veicolo in movimento. I prodotti Posey non sono progettati per sostenere la forza di un urto o di un arresto improvviso.
- Controllare le cerniere e i fissaggi con Velcro prima di ogni utilizzo. ELIMINARE il dispositivo se non permette un fissaggio sicuro.

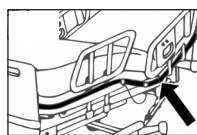

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO (se applicabile):

- Chiudere tutte le fibbie e le chiusure per ridurre il rischio di danni durante i cicli di lavaggio e di asciugatura. NON inserire le fibbie o le chiusure in estrattori. Per prolungare al massimo la durata, lavare in una sacca da lavanderia.
- Chiusure in acciaio inossidabile: Posey raccomanda di trattare le chiusure con un lubrificante che formi una pellicola asciutta (silicone) dopo ogni pulizia. Per risultati ottimali, spruzzarne una piccola quantità nella chiusura. Azionare la chiusura con una chiave più volte per assicurare che tutte le superfici siano ben lubrificate.
- Prima del lavaggio, chiudere le cerniere e rivoltare il prodotto per proteggerle.
- I fissaggi con Velcro possono raccogliere pelucchi dopo l'uso ripetuto o il lavaggio, riducendo la tenuta della chiusura. Prima del lavaggio, far aderire le due parti dei fissaggi con Velcro l'una all'altra per prevenire l'accumulo di pelucchi. Se necessario, utilizzare una spazzola rigida per rimuovere i pelucchi dal lato con i gancetti del fissaggio con Velcro.

Questi prodotti, diversamente da quelli in schiuma, possono essere lavati in lavatrice seguendo le linee guida dei CDC relative ai materiali sporchi di sangue o di liquidi corporei.



- Per i materiali non contaminati, utilizzare cicli di lavaggio e asciugatura a bassa temperatura per prolungare la vita del prodotto.

- Per i prodotti in schiuma:




- Verificare che i prodotti siano completamente asciutti prima dell'uso.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE:

- Questo dispositivo è progettato per l'uso in normali ambienti al chiuso.
- Questo dispositivo può essere conservato alla temperatura ambiente di un deposito con livelli di umidità normali. Evitare di esporre a condizioni di umidità elevata o eccessiva, in quanto si rischia di danneggiare i materiali che compongono il prodotto.

COME REALIZZARE LA LEGATURA A SGANCIO RAPIDO POSEY

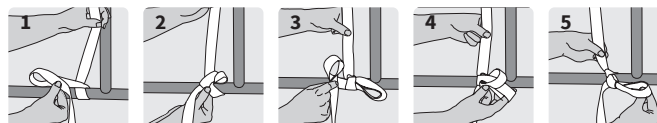

- Avvolgere la cinghia una volta intorno al telaio che si muove con il paziente (non fissare alle sponde laterali o alla testiera/pediera), lasciando una coda di almeno 20 cm. Piegare a metà l'estremità libera per creare un anello e farlo passare sull'altra estremità.
- Inserire la cinghia piegata nel punto in cui si intersecano le cinghie, come quando si allacciano le stringhe delle scarpe. Tirare l'anello per stringere.
- Piegare a metà l'estremità dell'anello per creare un secondo anello.
- Inserire il secondo anello nel primo.
- Tirare l'anello per stringere. Verificare che la cinghia sia fissata e non scorra in nessuna direzione.
- Ripetere sull'altro lato. Testare le legature a sgancio rapido per accertarsi che il nodo si apra tirando una volta l'estremità libera della cinghia.

IT Segnalare eventuali incidenti gravi correlati all'uso del dispositivo a TIDI Products e all'autorità competente dello stato membro. | Le traduzioni del presente documento in francese, spagnolo, olandese, tedesco, italiano e portoghese sono disponibili sul sito www.tidiprodotti.com/IFU.

SMALTIMENTO: Smaltire il prodotto in conformità alle linee guida locali o della struttura nel caso in cui il prodotto sia usurato o danneggiato.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Telefono: 1.800.521.1314 • Internazionale: +1.920.751.4036
www.tidiprodotti.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germania



UK Persona responsabile:
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o CR360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Regno Unito






UITSLUITEND VOOR PRODUCTEN OP VOORSCHRIFT. Voorgeschreven hulpmiddelen mogen volgens de Amerikaanse wet uitsluitend door of in opdracht van een arts verkocht worden. Uitsluitend bestemd voor gebruik in medische instellingen met vergunning.

OPLEIDING MEDEWERKERS: TIDI biedt gratis trainingshulpmiddelen voor de praktijk. Neem hiervoor online contact op met TIDI op www.tidiproducts.com of bel gratis via 1.800.521.1314 (in de VS).

VÓÓR HET TOEPASSEN VAN EEN IMMOBILISATIEHULPMIDDEL: Volg het beleid en de procedures van uw ziekenhuis die in overeenstemming zijn met de CMS-richtlijnen en staatswetgeving in de VS, of van andere bestuursorganen buiten de VS.

AANVULLENDE WAARSCHUWINGEN:

- Patiënten moeten **ALTIJD** volgens het instellingsbeleid gevolgd worden. Verkeerd aanbrengen of verkeerd gebruik van immobilisatiehulpmiddelen kan resulteren in ernstig of dodelijk letsel. Denk eraan dat constant toezicht gewenst kan zijn voor:
 - agressieve of onrustige patiënten; en
 - achteroverliggende patiënten; controleer of deze houding niet tot complicaties leidt bij patiënten die zouden kunnen overgeven terwijl ze geïmmobiliseerd zijn.
- Dit product mag **NOOIT** gewijzigd of gerepareerd worden. **ALTIJD** inspecteren vóór ieder gebruik: controleer op kapotte steken of onderdelen, op gescheurd, doorgesneden of gerafeld materiaal en op vergrendelingen, gespen en klittenbandsluitingen die niet goed werken. Vuile of beschadigde producten **NIET** gebruiken. Dat kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Beschadigde producten wegwerpen volgens het instellingsbeleid voor **BIOLOGISCH GEVAARLIJK** materiaal.
- Maak riempjes **ALTIJD** vast aan een gedeelte van het frame dat met de patiënt mee beweegt (niet aan voeten-/hoofdeinde of zijrails), buiten het bereik van de patiënt, met behulp van de snelkoppelingsbanden (zie onderstaande tekening) of gespen. Hiermee kan het hulpmiddel bij ongelukken of brand snel losgemaakt worden. Verricht een test om te verzekeren dat de riempjes niet te strak kunnen gaan zitten, niet los kunnen komen en niet kunnen slippen waardoor te veel speling ontstaat. In dat geval kan de patiënt van de stoel of het bed glijden, waardoor het risico op ernstig letsel of verstikking toeneemt. Het losmaken van de immobilisatiehulpmiddelen is een belangrijk aspect van brand- en rampenoefeningen bij de instelling. De riempjes kunnen in noodgevallen met een schaar worden doorgeknipt.
- Maak immobilisatieriempjes **NOOIT** vast aan zijrails of hoofd-/voeteneinde.
- Gebruik Posey-producten **NOOIT** op toiletten of op stoelen of meubilair waarop de producten niet volgens de aanwijzingen voor het aanbrengen bevestigd kunnen worden. **NIET** thuis gebruiken.
- Dit product **NOOIT** blootstellen aan open vuur, brand, rokend materiaal of sterke warmtebronnen. Sommige producten kunnen smelten of ontbranden/verbranden. De regels voor al dan niet roken bij de instelling moeten strikt gehandhaafd worden.
- Gebruik Posey-producten **NOOIT** als veiligheidsgordel in rijdende voertuigen. Posey-producten zijn niet bestand tegen krachten die vrijkomen bij aanrijdingen of plotseling stoppen.
- Controleer vóór elk gebruik de rits- en klittenbandsluitingen. **GOOI** het hulpmiddel **WEG** als het niet goed bevestigd kan worden.

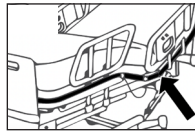

WASVOORSCHRIFT (waar van toepassing):

- Bevestig alle gespen en vergrendelingen om de kans op beschadiging tijdens het wassen en drogen te verminderen. Gespen en vergrendelingen mogen **NIET** door een wringer gehaald worden. Gebruik voor een maximale levensduur zo mogelijk een wasnet.
- Roestvrijstalen sloten: Posey raadt aan de sloten na het reinigen te behandelen met een droog smeermiddel (silicone). Spuit voor het beste resultaat een kleine hoeveelheid in het slot. Draai het slot een aantal keer open en dicht met de sleutel zodat alle oppervlakken goed worden gesmeerd.
- Trek alle ritsen dicht en keer het product binnenstebuiten om de rits te beschermen voordat u het product wast.
- Klittenband kan na herhaald wassen pluis bevatten waardoor het minder goed vast blijft zitten. Bevestig de haakjes op de lusjes voor het wassen om de afzetting van pluis te beperken. Gebruik zo nodig een harde borstel om het pluis uit het klittenband te verwijderen.

Met uitzondering van de schuimrubberen producten kunnen deze producten in de wasmachine worden gewassen volgens de richtlijnen van de Amerikaanse CDC voor met bloed of lichaamsvloeistoffen verontreinigd materiaal.



- Was en droog ongecontamineerd materiaal op lagere temperaturen zodat het product langer meegaat.

- Voor schuimrubberen producten:




- Zorg ervoor dat de producten vóór gebruik volledig droog zijn.

OPSLAG EN GEBRUIKSINSTRUCTIES:

- Dit hulpmiddel is bestemd voor gebruik in een normale binnenomgeving.
- Dit hulpmiddel kan worden opgeslagen in magazijnen bij omgevingstemperatuur met een normale vochtigheidsgraad. Vermijd overmatig vocht of hoge vochtigheid waardoor het materiaal van het product beschadigd kan raken.

VASTMAKEN VAN DE POSEY-SNELKOPPELINGSBAND

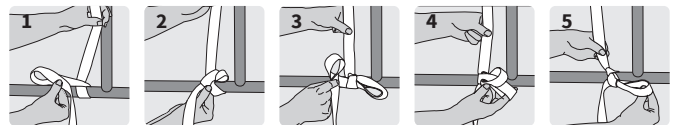

- Wikkel het riempje eenmaal rond het frame dat met de patiënt meebeweegt (niet aan zijrails of hoofd-/voeteneinde bevestigen) en laat een gedeelte van minimaal 20 cm over. Vouw het losse uiteinde dubbel om een lus te vormen en leg deze over het andere uiteinde.
- Steek het omgevouwen riempje door de plaats waar de riempjes elkaar kruisen, net zoals bij het strikken van een schoenveter. Trek de lus strak.
- Vouw het losse uiteinde dubbel om een tweede lus te vormen.
- Haal de tweede lus door de eerste lus.
- Trek de lus strak. Controleer of het riempje goed vastzit en niet kan verschuiven.
- Herhaal dit aan de andere kant. Oefen in het snel losmaken van de riempjes om te verzekeren dat de knoop meteen loskomt als u aan het losse uiteinde van het riempje trekt.

NL

Meld een ernstig incident in verband met het gebruik van het hulpmiddel aan TIDI Products en de bevoegde instantie in de lidstaat. | Vertalingen van dit document in het Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Italiaans en Portugees vindt u op www.tidiproducts.com/IFU.

VERWIJDEREN: Product afvoeren volgens de lokale richtlijnen of de richtlijnen van de instelling als het product slijtage of beschadiging vertoont.



APENAS PARA PRODUTOS SOB PRESCRIÇÃO. A legislação federal dos EUA restringe a venda de dispositivos médicos a profissionais médicos ou por ordem destes. Para utilização apenas numa instituição de cuidados de saúde autorizada.

FORMAÇÃO DE PESSOAL: a TIDI facilita ajudas de formação no terreno sem quaisquer custos. Contacte a TIDI online em www.tidiproducts.com ou ligue para o número gratuito 1.800.521.1314.

ANTES DE APLICAR QUALQUER IMOBILIZADOR: Siga as políticas e os procedimentos de imobilização do seu hospital que estejam em conformidade com as orientações dos CMS e a legislação estatal nos EUA, ou outras agências reguladoras fora dos EUA.

⚠️ AVISOS ADICIONAIS:

1. Monitorize SEMPRE o doente segundo a política da instituição. A aplicação ou utilização inadequada de qualquer imobilizador poderá resultar em lesões graves ou morte. Tenha em mente que poderá ser necessária uma monitorização constante para:
 - Doentes agressivos ou agitados; e
 - Doentes em posição supina; certifique-se de que o facto de estar nesta posição não causa quaisquer complicações para os doentes que apresentam risco de vômitos enquanto estão imobilizados.
2. NUNCA altere nem repare este produto. Inspeccione SEMPRE antes de cada utilização: verifique quanto à presença de pontos ou componentes danificados; material rasgado, cortado ou desgastado; ou bloqueios, fivelas ou fechos de velcro que não imobilizam com firmeza. NÃO utilize produtos sujos ou danificados. Isso poderia resultar em lesões graves ou morte. Elimine os produtos danificados segundo a política de materiais de RISCO BIOLÓGICO da instituição.
3. Fixe SEMPRE as cintas a uma parte da estrutura que se mova com o doente (que não seja o painel da cabeça/pés ou guardas laterais), fora do alcance dos doentes, utilizando nós (veja o esquema abaixo) ou fivelas de libertação rápida. Estes permitem uma libertação fácil em caso de acidente ou incêndio. Teste para garantir que as cintas não apertam, afrouxam ou criam folga em excesso. Se isto ocorrer, o doente poderá deslizar da cadeira ou cama, aumentando o risco de lesão grave ou asfixia. A libertação de imobilizadores é uma parte importante dos exercícios de desastres e incêndios na instituição. As cintas podem ser cortadas com tesoura numa emergência.
4. NUNCA fixe cintas imobilizadoras à guarda lateral ou ao painel dos pés/cabeça.
5. NUNCA utilize produtos Posey em sanitas ou em qualquer cadeira ou móvel que não permita uma aplicação adequada conforme indicado nas Instruções de aplicação. NÃO utilize em casa.
6. NUNCA exponha este produto a chamas desprotegidas, fogo, materiais associados ao tabagismo ou fontes de elevado calor. Alguns produtos poderão derreter ou entrar em combustão e arder. A política de tabagismo/antitabagismo da instituição deve ser aplicada com rigor.
7. NUNCA utilize um produto Posey como cinto de segurança num veículo em movimento. Os produtos Posey não foram concebidos para suportar a força de um acidente ou uma paragem repentina.
8. Teste os fechos-ecler ou fechos de velcro antes de cada utilização. ELIMINE o dispositivo se o mesmo não apertar com segurança.



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM (se aplicável):

- Aperte todas as fivelas e bloqueios para reduzir o risco de danos durante os ciclos de lavagem e secagem. NÃO coloque as fivelas ou bloqueios em máquinas de secar. Para uma vida útil máxima, lave dentro de um saco de lavagem.
- Bloqueios de aço inoxidável: a Posey recomenda que os bloqueios sejam tratados com um lubrificante de película seca (silicone) após cada limpeza. For obter os melhores resultados, pulverize uma pequena quantidade no bloqueio. Movimente o mecanismo do bloqueio com uma chave várias vezes para garantir que todas as superfícies ficam bem lubrificadas.
- Antes da lavagem, feche o fecho-ecler e vire o produto do avesso para proteger o fecho-ecler.
- Os fechos de velcro poderão acumular fiapos após lavagens ou utilizações repetidas, reduzindo deste modo a força da aderência. Feche o velcro antes da lavagem para ajudar a prevenir a acumulação de fiapos. Conforme necessário, utilize uma escova de cerdas suaves para remover fiapos do lado dos "ganchos".

• Estes produtos, com a exceção dos produtos feitos de espuma, podem ser lavados à máquina em conformidade com as orientações da CDC referentes a materiais sujos com sangue ou fluidos corporais.



- Para materiais não contaminados, utilize ciclos de lavagem e secagem de temperatura mais baixa para prolongar a vida útil do produto.

- Para produtos feitos de espuma:




- Certifique-se de que os produtos estão completamente secos antes da utilização.

ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO:

- Este dispositivo foi concebido para utilização em ambientes interiores normais.
- Este dispositivo pode ser armazenado a temperaturas ambiente de armazém, a níveis normais de humidade. Evite o excesso de humidade que possa danificar os materiais do produto.

COMO FAZER O NÓ DE LIBERTAÇÃO RÁPIDA POSEY

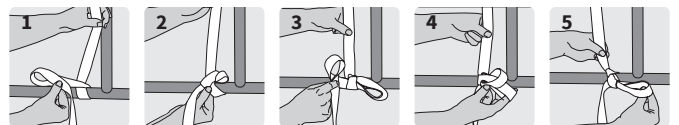

1. Enrole a cinta em torno da estrutura que se mova com o doente (não fixe à guarda lateral ou painel dos pés/cabeça), deixando uma sobra de pelo menos 20 cm (8 pol.). Dobre a extremidade solta a meio para criar um laço e cruze-a sobre a outra extremidade.
2. Insira a cinta dobrada onde as cintas se cruzam, como se estivesse a apertar os cordões de um sapato. Puxe o laço para apertar.
3. Dobre a extremidade solta a meio para criar um segundo laço.
4. Insira o segundo laço no primeiro laço.
5. Puxe o laço para apertar. Teste para garantir que a cinta está segura e não desliza em nenhuma direção.
6. Repita do outro lado. Pratique os nós de libertação rápida para garantir que o nó se desfaz puxando uma vez pela extremidade solta da cinta.

PT

Deve comunicar qualquer incidente grave relacionado com a utilização do dispositivo à TIDI Products e à autoridade competente do Estado-Membro. | Traduções deste documento em francês, espanhol, neerlandês, alemão, italiano e português encontram-se em www.tidiproducts.com/IFU.

ELIMINAÇÃO: Eliminar o produto de acordo com as orientações da instituição se o produto estiver desgastado ou danificado.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 EUA
Telephone: 1.800.521.1314 • Internacional: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Alemanha



UK Pessoa responsável
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o CR360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Reino Unido

