



# AquaGuard®

## QUICK START GUIDE

For complete instructions, including contraindications and precautions, see AquaGuard IFU 44U00147 included with product. IFU can also be found at [www.tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com).

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO


Para obtener las instrucciones completas, incluidas las contraindicaciones y precauciones, consulte las instrucciones de uso de AquaGuard 44U00147 incluidas con el producto. Las instrucciones de uso también se pueden encontrar en [www.tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com).

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour des instructions complètes, y compris les contre-indications et les précautions, voir AquaGuard IFU 44U00147 inclus avec le produit. Les instructions d'utilisation (IFU) peuvent également être consultées sur le site [www.tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com).

### STEP 1: IMPORTANT!

Prior to application, keep skin dry and clear from oils and lotions. An alcohol wipe may be used to prepare skin for application.

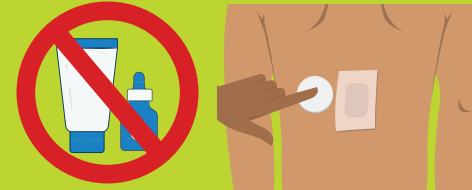


### STEP 2:

Fold back a small section of the paper strips, exposing adhesive at corners. Be careful to avoid touching adhesive.



### STEP 3:

Remove top strip and place adhesive on skin above intended site.


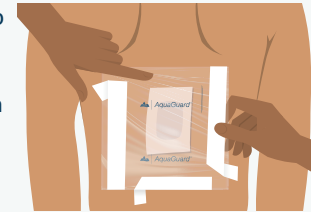


### STEP 4:

Remove side strip and create a "pleat" by pinching the adhesive together in the middle. Smooth adhesive to skin. Pleating the sides creates a "pocket" so that the sheet is not tight against the coverage area.




Repeat on other side.

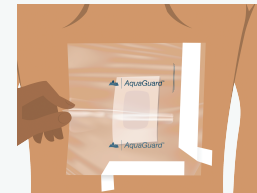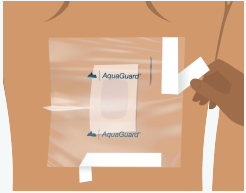


### STEP 5:

Remove bottom strip and place just below intended site, pleating if necessary.

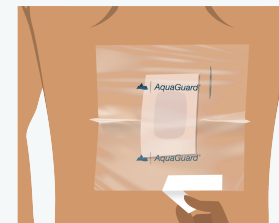


### STEP 6:

Apply pressure to all sides of the sheet to ensure a tight seal before entering shower. Sheet should stay sealed to skin while moving your body.

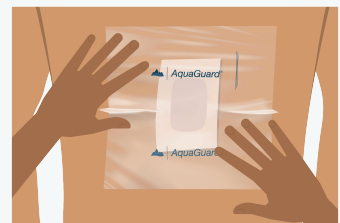


## PASO 1: ¡IMPORTANTE!

Antes de colocarse el producto, mantenga la piel seca y libre de aceites y lociones. Puede utilizar una toallita con alcohol para preparar la piel para la aplicación.

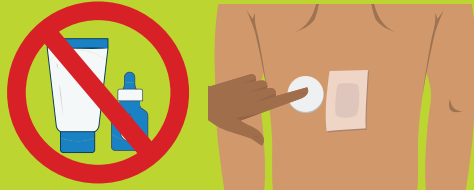


## PASO 2:

Doble hacia atrás una pequeña sección de las tiras de papel, dejando al descubierto el adhesivo en las esquinas. Procure no tocar el adhesivo.

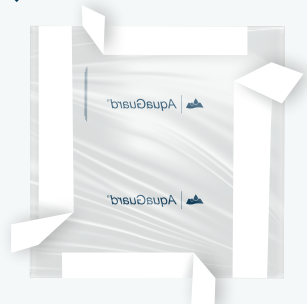


## ÉTAPE 1 : IMPORTANT!

Avant l'application, gardez la peau sèche et exempte d'huiles et de lotions. Une lingette imbibée d'alcool peut être utilisée pour préparer la peau à l'application.

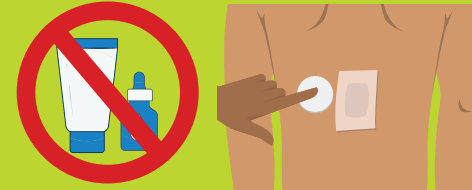

## ÉTAPE 2 :

Repliez une petite section des bandes de papier pour exposer l'adhésif dans les coins. Veillez à éviter de toucher l'adhésif.

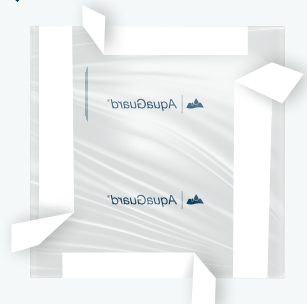


## PASO 3:


Retire la tira superior y coloque el adhesivo sobre la piel por encima de la zona deseada.



Retire la tira lateral y cree un "pliegue" pellizcando el adhesivo en el centro. Alise el adhesivo sobre la piel. El pliegue de los laterales crea una "bolsa" para que la lámina no quede apretada contra la zona de cobertura.

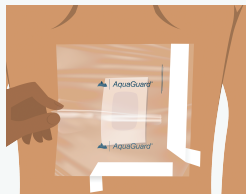


Repita del otro lado.

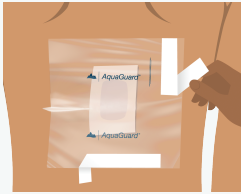


## ÉTAPE 3 :



Retirez la bande supérieure et placez l'adhésif sur la peau au-dessus du site prévu.

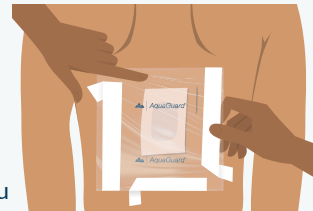

Retirez la bande latérale et créez un « pli » en pinçant l'adhésif au milieu. Lissez l'adhésif sur la peau. Le pli ainsi formé sur les côtés permet de créer une « poche » pour empêcher que la feuille ne soit pas serrée contre la zone de couverture.

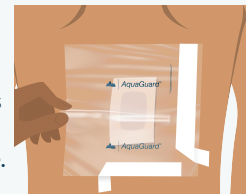

Répétez de l'autre côté.

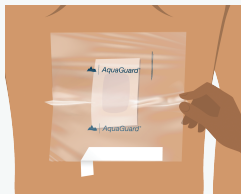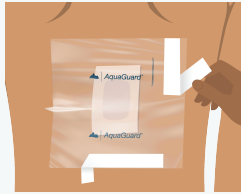


## PASO 5:

Retire la tira inferior y colóquela justo por debajo de la zona deseada, formando un pliegue si es necesario.




## PASO 6:

Aplique presión en todos los lados de la lámina para garantizar un sellado hermético antes de entrar en la ducha. La lámina debe permanecer adherida a la piel mientras mueve el cuerpo.

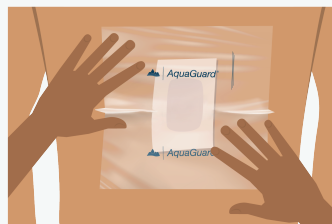

## ÉTAPE 5 :

Retirez la bande inférieure et placez-la juste en dessous du site prévu, en plissant si nécessaire.

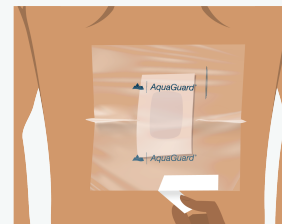

## ÉTAPE 6 :

Appliquez une pression sur tous les côtés de la feuille pour assurer une étanchéité parfaite avant d'entrer dans la douche. La feuille doit rester collée à la peau lorsque vous bougez votre corps.

